


Soovitav puurimisjärjestuse juhend

Externa BTI implantaatidele



MÄRKUS: Kontrollige toote kättesaadavust erinevatel turgudel oma turustajalt.

Puuri sügavuse märgid

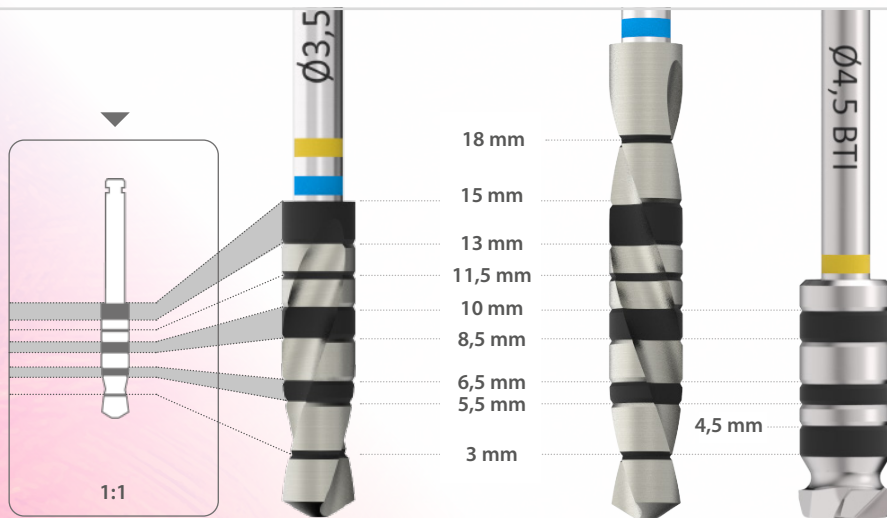

Klass/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

PUUR

Initsiaalpuur

Puur

Süvistuspuur

Esilõikepuurid

PÖÖRETE ARV

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

NIISUTUS

jah

nr


nr

nr



Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)

- Implantaadi kogupikkus
- 75 % implantaadi kogupikkusest
- 25 % implantaadi kogupikkusest
- 5,0 mm puurimissügavus

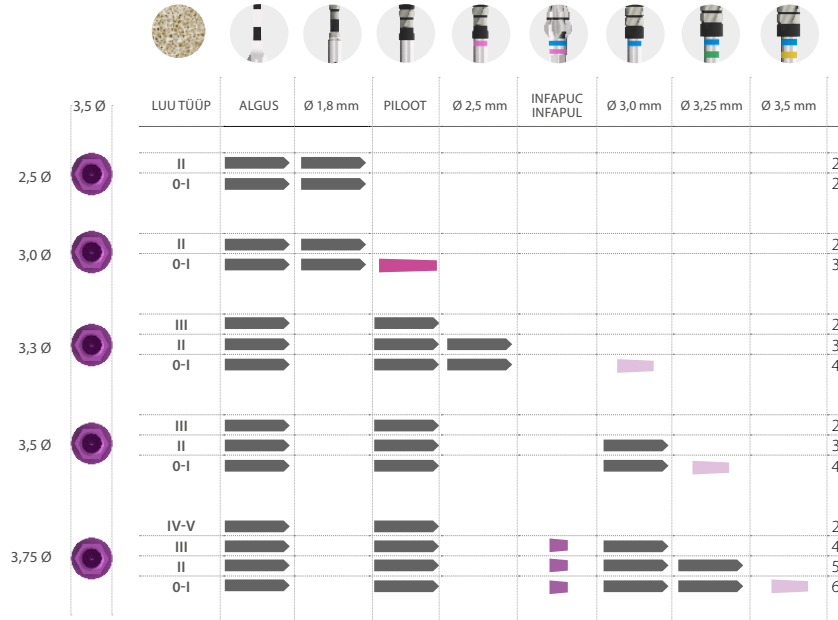






Implantaadi pikkused

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Implantaadi kogupikkus
X.X Ø Total length of the implant with specified diameter drill
5,0 mm drilling depth (Do not use with 4,5mm length)

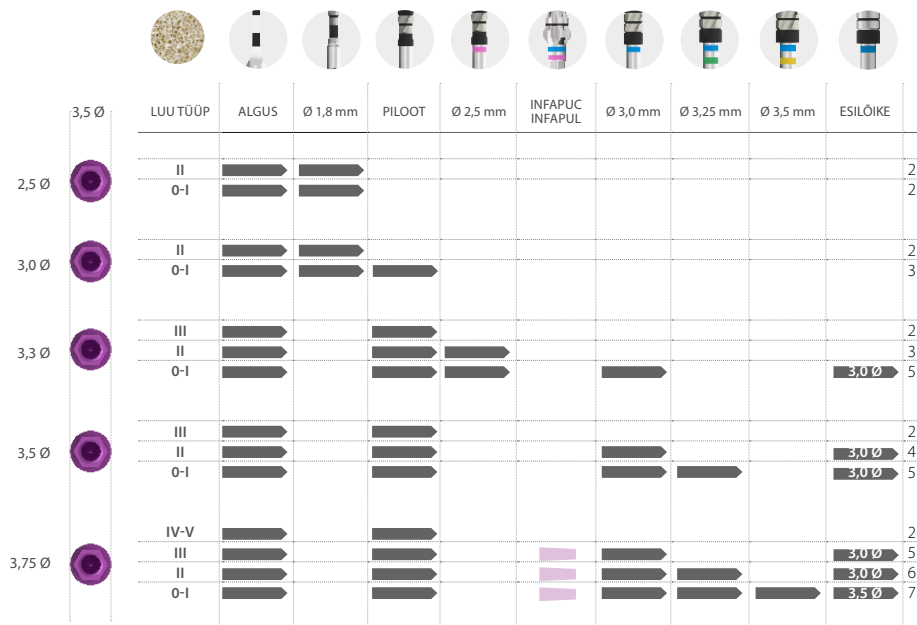

Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)

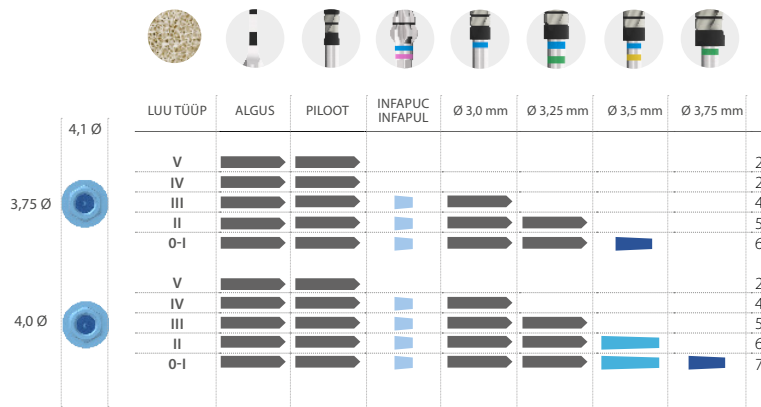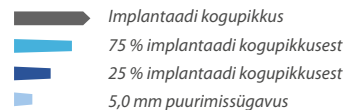




Implantaadi pikkused

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Implantaadi kogupikkus
- X,X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
- 5,0 mm puurimissügavus
- 2-3 mm puurimissügavus

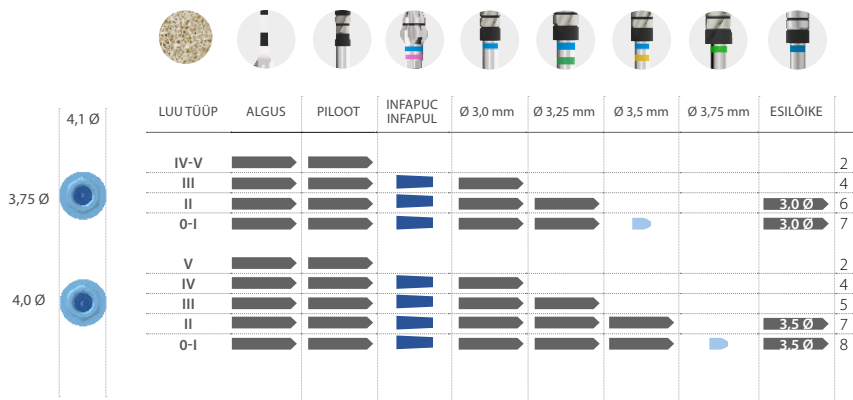


Puurimisjärjestuse juhend

Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)



-  Implantaadi kogupikkus
-  75 % implantaadi kogupikkusest
-  25 % implantaadi kogupikkusest
-  4,5 mm puurimissügavus

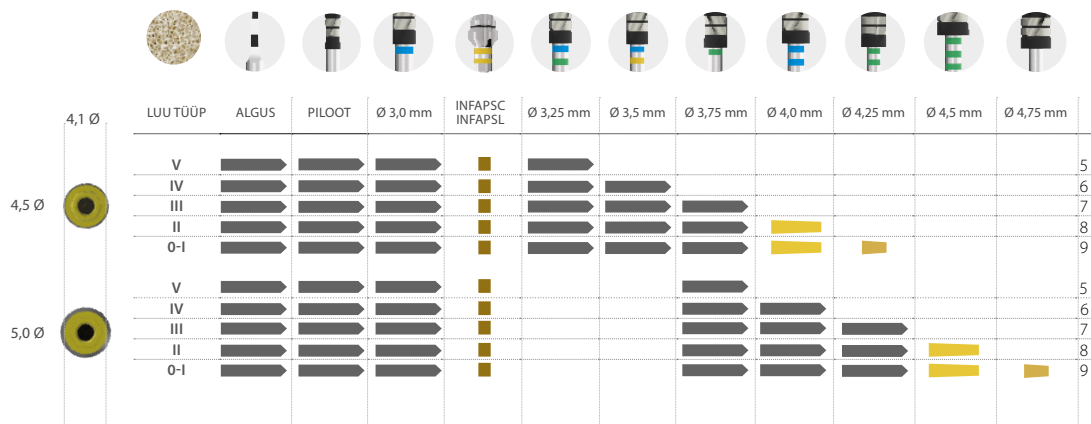

Implantaadi pikkused (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Implantaadi kogupikkus
X.X Ø
4,5 mm puurimissügavus

