


Soovitav puurimisjärjestuse juhend

Externa BTI implantaatidele



MÄRKUS: Kontrollige toote kättesaadavust erinevatel turgudel oma turustajalt.

Puuri sügavuse märgid

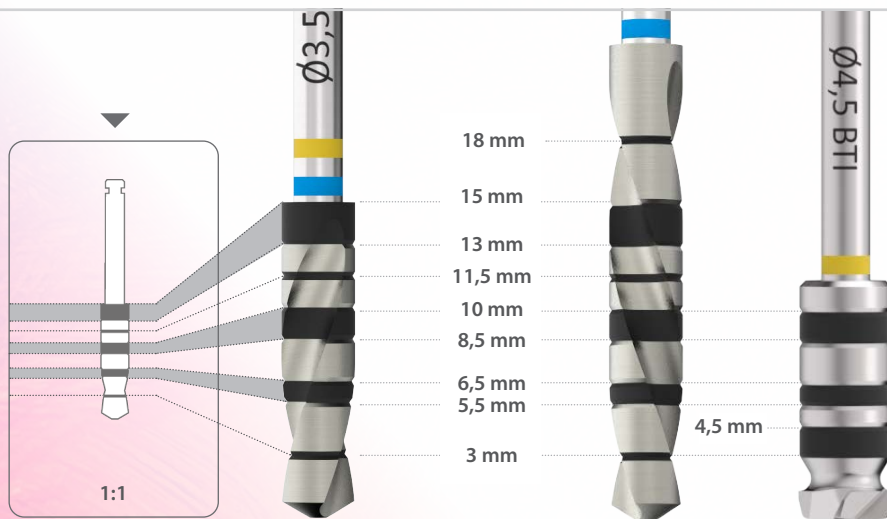

KLASS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

PUUR

Initsiaalpuur
 Puur
 Süvistuspuur
 Esilõikepuurid

PÖÖRETE ARV

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

NIISUTUS

jah
 nr
 nr
 nr



Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)

- Implantaadi kogupikkus
- 75 % implantaadi kogupikkusest
- 25 % implantaadi kogupikkusest
- 5,0 mm puurimissügavus




Puurimisjärjestuse juhend





Implantaadi pikkused

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Implantaadi kogupikkus
X.X Ø Total length of the implant with specified diameter drill
5,0 mm drilling depth (Do not use with 4,5mm length)

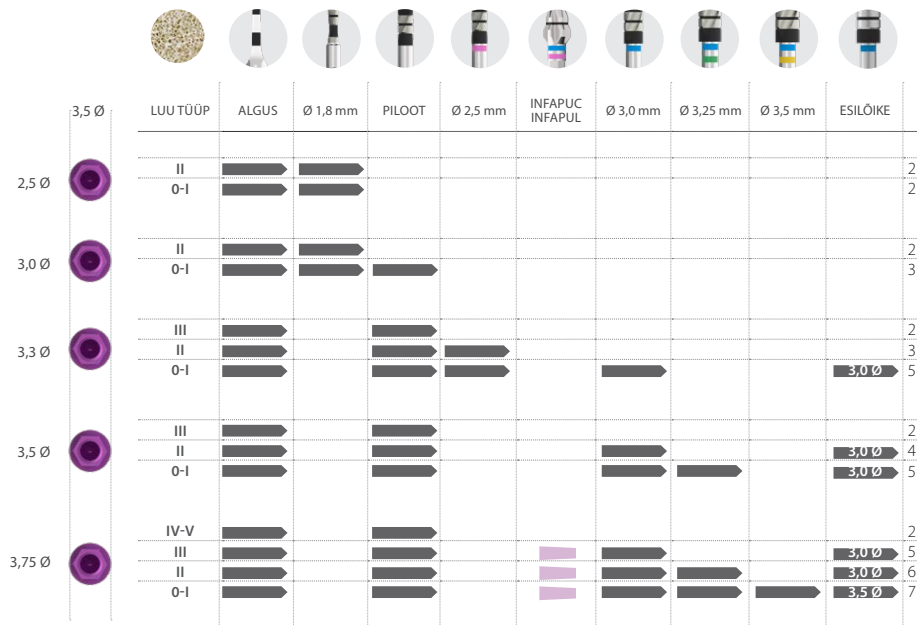


Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)

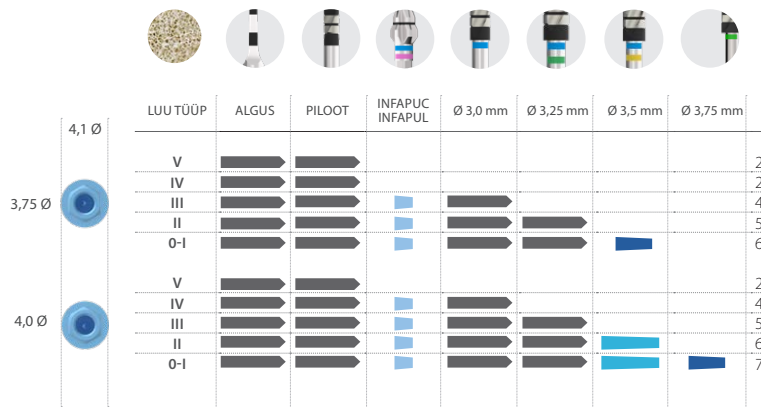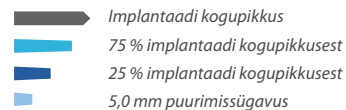

Implantaadi pikkused (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Implantaadi kogupikkus
- X,X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
- 5,0 mm puurimissügavus
- 2-3 mm puurimissügavus

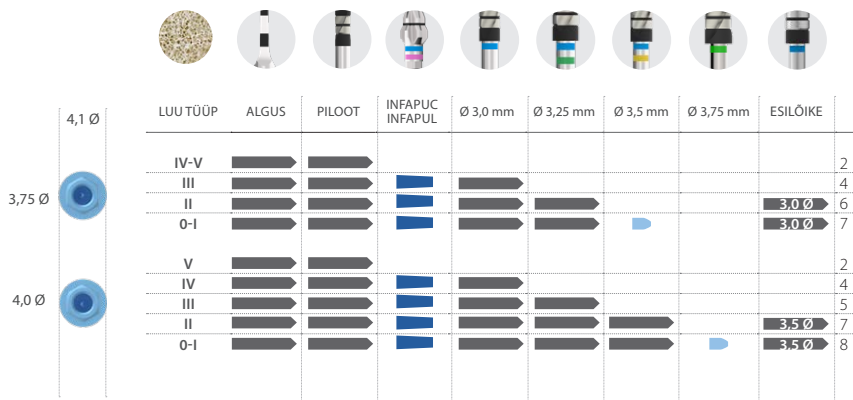

Implantaadi pikkused (10 - 15 mm)



-  Implantaadi kogupikkus
-  75 % implantaadi kogupikkusest
-  25 % implantaadi kogupikkusest
-  4,5 mm puurimissügavus

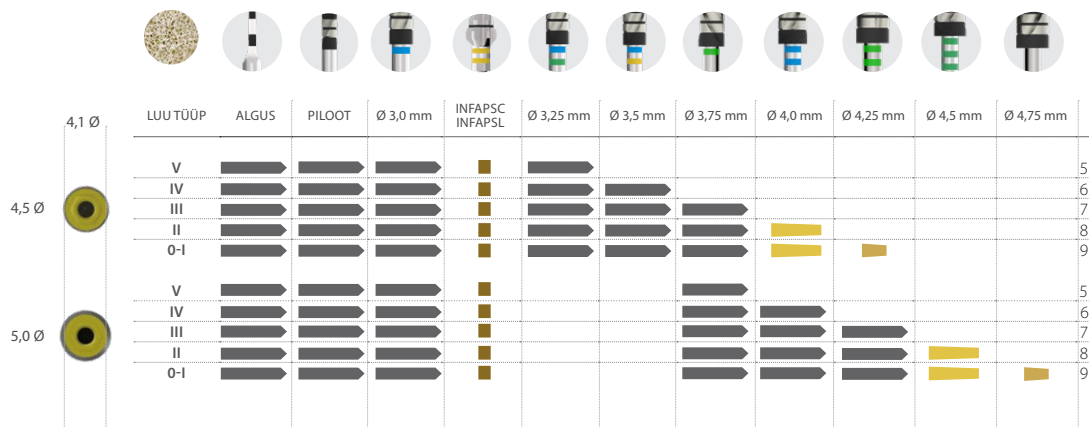

Implantaadi pikkused (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Implantaadi kogupikkus
- X.X Ø Implantaadi kogupikkus koos määratud puuri läbimõõduga
- 4,5 mm puurimissügavus

