



Suosittelava poraus järjestysopas

Externa BTI-implanttien osalta



HUOMAUTUS: kysy jälleenmyyjältäsi tuotteen saatavuudesta eri markkinoilla.

Poraussyvyyden merkit

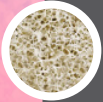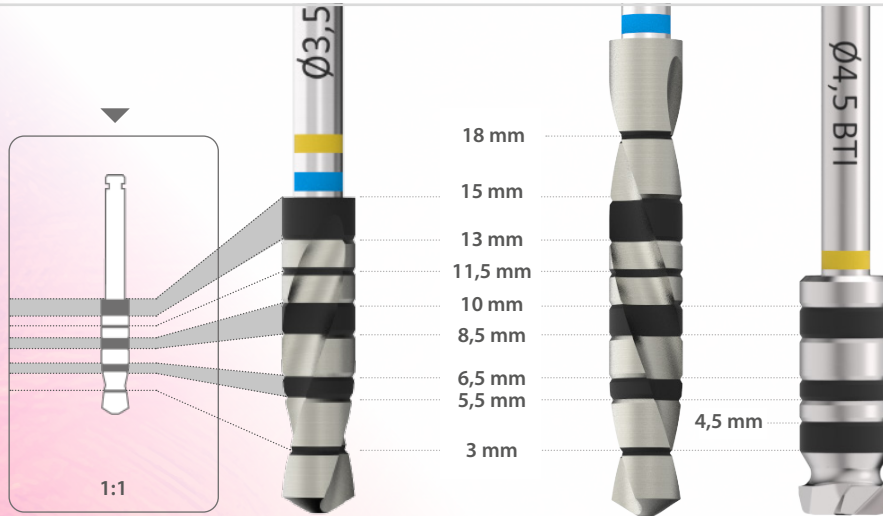

Luokka/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

PORA

Aloituspora

Pora

Upotusporat

Edestä leikkaavat porat

KIERROSNOPEUDET

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

KASTELU

kyllä

ei

ei

ei



Implantin pituudet (10 - 15 mm)

- Implantin kokonaispituus
- 75 % implantin kokonaispituudesta
- 25 % implantin kokonaispituudesta
- Porausvyövyys 5,0 mm








Implantin pituudet

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Implantin kokonaispituus
- X.X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 5 mm (ei saa käyttää 4,5 mm:n pituudessa)

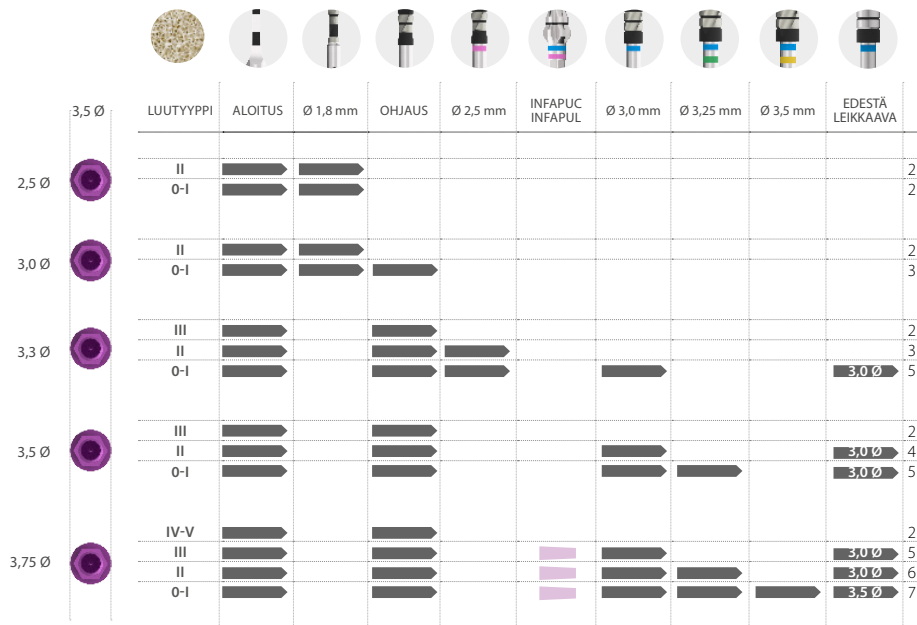


Implantin pituudet (10 - 15 mm)

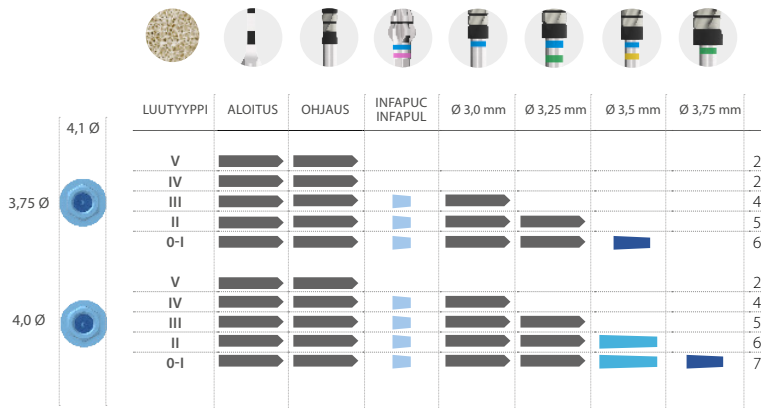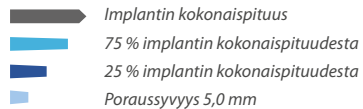

Implantin pituudet (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Implantin kokonaispituus
- X,X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 5,0 mm
- Poraussyvyys 2-3 mm

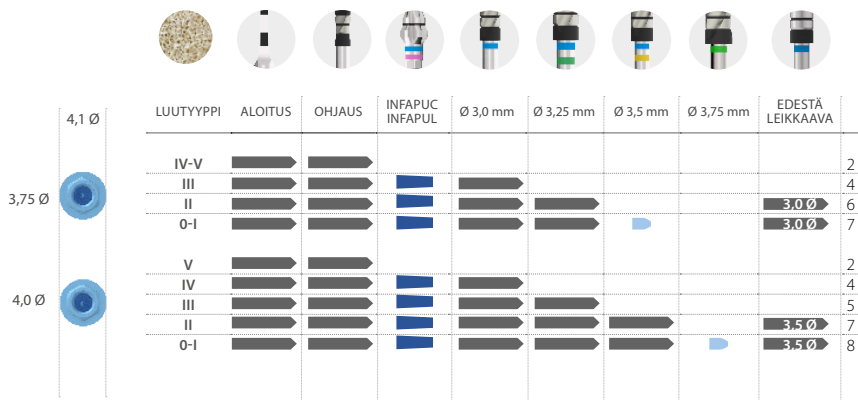

Implantin pituudet (10 - 15 mm)



-  Implantin kokonaispituus
-  75 % implantin kokonaispituudesta
-  25 % implantin kokonaispituudesta
-  Porausyvyys 4,5 mm

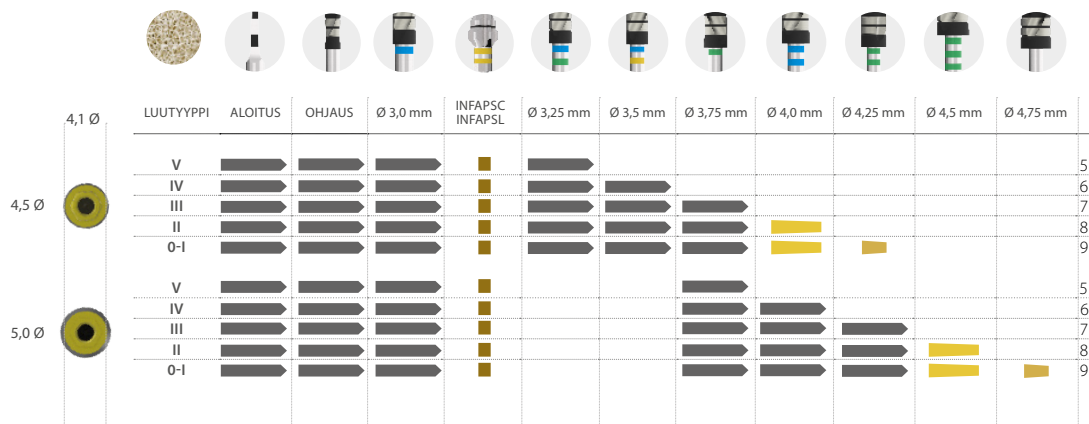




Implantin pituudet (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Implantin kokonaispituus
X,X Ø
Poraussyvyys 4,5 mm

Universal Plus -alusta
Alustan halkaisija Ø4,1 mm

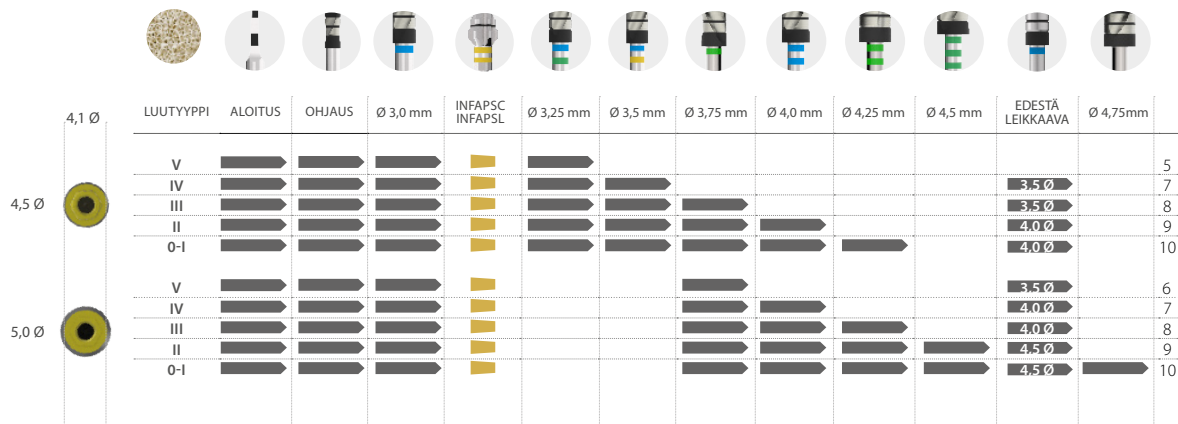

Porausjärjestyksen
opas