


Suosittelava poraus järjestysopas

Externa BTI-implanttien osalta



HUOMAUTUS: kysy jälleenmyyjältäsi tuotteen saatavuudesta eri markkinoilla.

Poraussyvyyden merkit

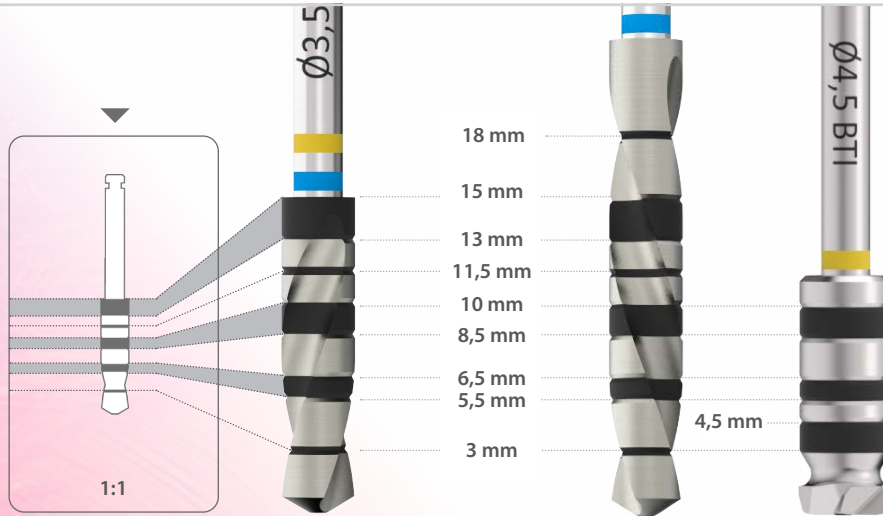

LUOKKA / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

PORA

Aloituspora
Pora
Upotusporat
Edestä leikkaavat porat

KIERROSNOPEUDET

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

KASTELU

kyllä
ei
ei
ei



Implantin pituudet (10 - 15 mm)

- Implantin kokonaispituus
- 75 % implantin kokonaispituudesta
- 25 % implantin kokonaispituudesta
- Porausvyövyys 5,0 mm







(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

	LUUTYYPPI	ALOITUS	Ø 1,8 mm	OHJAUS	Ø 2,5 mm	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	EDESTÄ LEIKKAAVA
3,5 Ø										
2,5 Ø	II	→	→							2
	0-I	→	→							2
3,0 Ø	II	→	→							2
	0-I	→	→	→						3
3,3 Ø	III	→		→						2
	II	→		→	→					3
	0-I	→		→	→		→		3,0 Ø	5
3,5 Ø	III	→		→						2
	II	→		→			→		3,0 Ø	4
	0-I	→		→			→	→	3,0 Ø	5
3,75 Ø	IV-V	→		→						2
	III	→		→		→			3,0 Ø	5
	II	→		→		→	→		3,0 Ø	6
	0-I	→		→		→	→	→	3,5 Ø	7

Porausjärjestyksen opas




Implantin pituudet (10 - 15 mm)

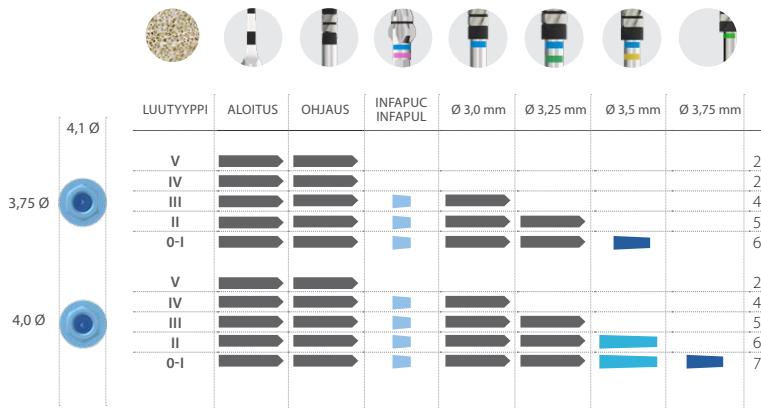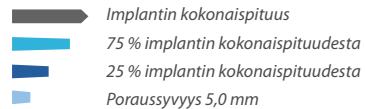

Implantin pituudet (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)




- Implantin kokonaispituus
- X,X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 5,0 mm
- Poraussyvyys 2-3 mm

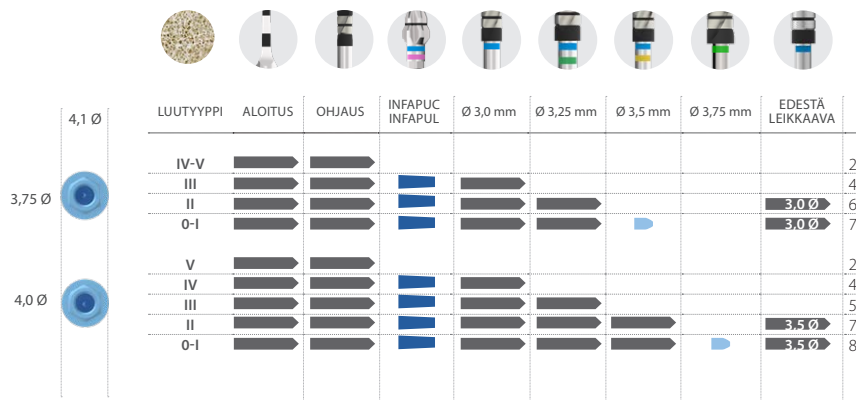

Implantin pituudet (10 - 15 mm)


- Implantin kokonaispituus
- 75 % implantin kokonaispituudesta
- 25 % implantin kokonaispituudesta
- Porausyvvyys 4,5 mm

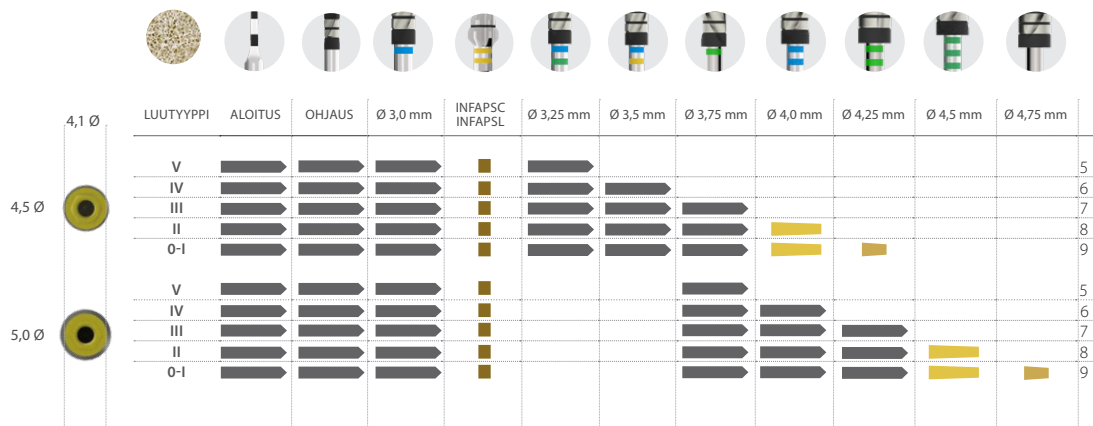



Implantin pituudet (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Implantin kokonaispituus
- X,X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 4,5 mm

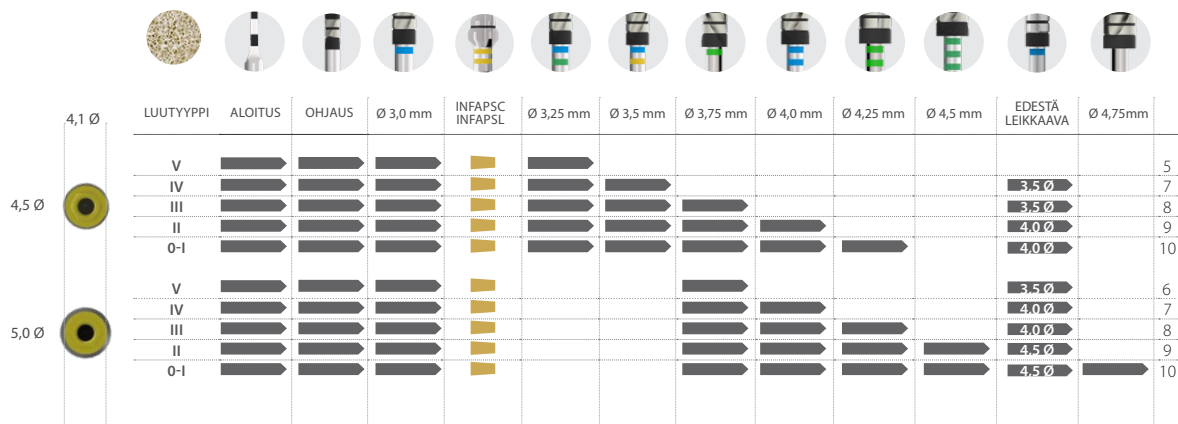

Universal Plus -alusta
Alustan halkaisija Ø4,1 mm

Porausjärjestyksen
opas

