


Séquences de forage recommandées

pour implants BTI Externa



REMARQUE : Veuillez consulter la disponibilité du produit sur les différents marchés auprès de chaque distributeur.

Marques de profondeur de forage

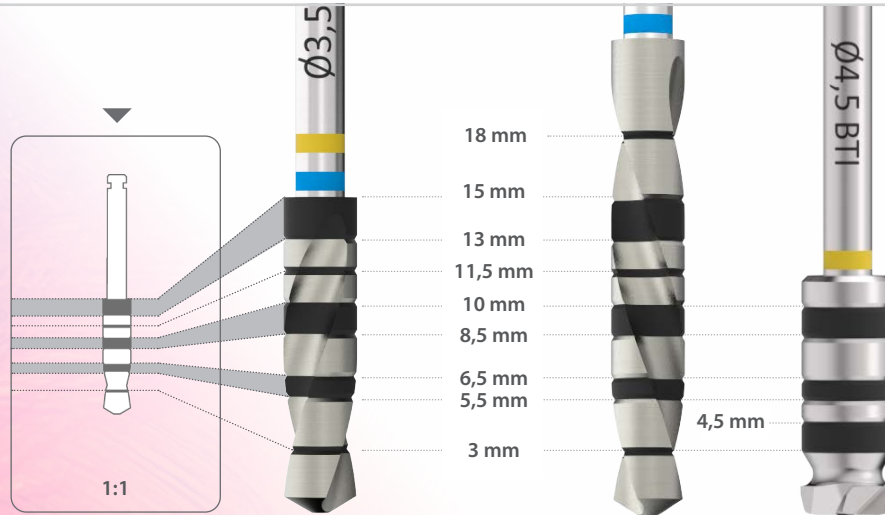

TYPE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FORET

Foret de démarrage
Forets
Fraises cuvette
Foret coupe frontale

VITESSE

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

IRRIGATION

oui
non
non
non



Implants de longueur (de 10 à 15 mm)

- Longueur totale de l'implant
- 75 % de longueur totale de l'implant
- 25 % de longueur totale de l'implant
- 5,0 mm de profondeur de forage







Implants de longueur

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Longueur totale de l'implant
 Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
 5 mm de profondeur de forage
 (Ne pas utiliser avec la longueur 4,5 mm)


	TYPE OSSEUX	DÉMARRAGE	Ø 1,8 mm	PILOTE	Ø 2,5 mm	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	COUPE FRONTALE
3,5 Ø										
2,5 Ø	II									2
	0-I									2
3,0 Ø	II									2
	0-I									3
3,3 Ø	III									2
	II									3
	0-I									5
3,5 Ø	III									2
	II									4
	0-I									5
3,75 Ø	IV-V									2
	III									5
	II									6
	0-I									7

Implants de longueur (de 10 à 15 mm)

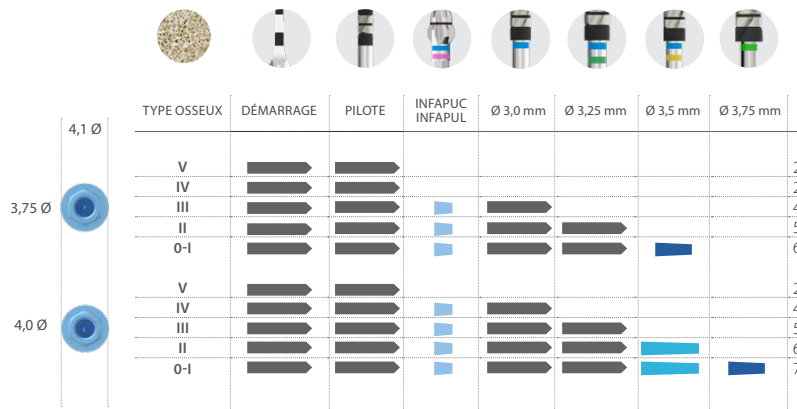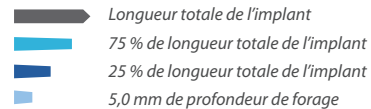

Implants de longueur (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Longueur totale de l'implant
- Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
- 5,0 mm de profondeur de forage
- 2-3 mm de profondeur de forage

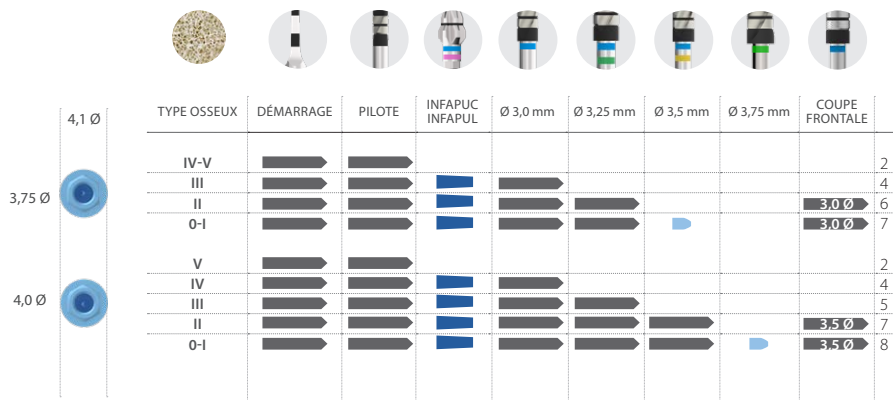

Implants de longueur (de 10 à 15 mm)



- Longueur totale de l'implant
- 75 % de longueur totale de l'implant
- 25 % de longueur totale de l'implant
- 4,5 mm de profondeur de forage

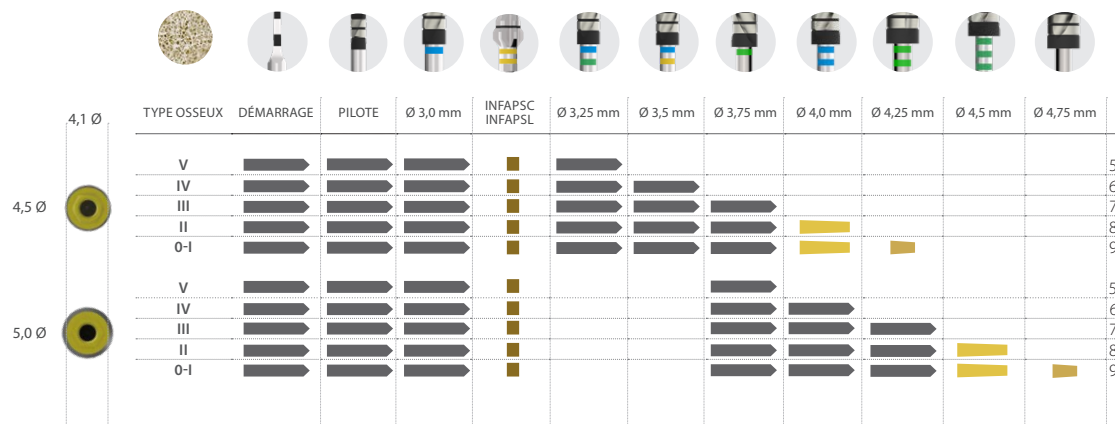

Implants de longueur (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



Longueur totale de l'implant
 Longueur totale de l'implant avec foret de diamètre spécifié
 4,5 mm de profondeur de forage

