



Útmutató az ajánlott fúrási lépésekről

az Externa BTI implantátumokhoz



MEGJEGYZÉS: a termék elérhetőségéről a különböző piacokon érdeklődjön a forgalmazónál

Fúrásmélység-jelek

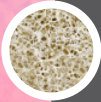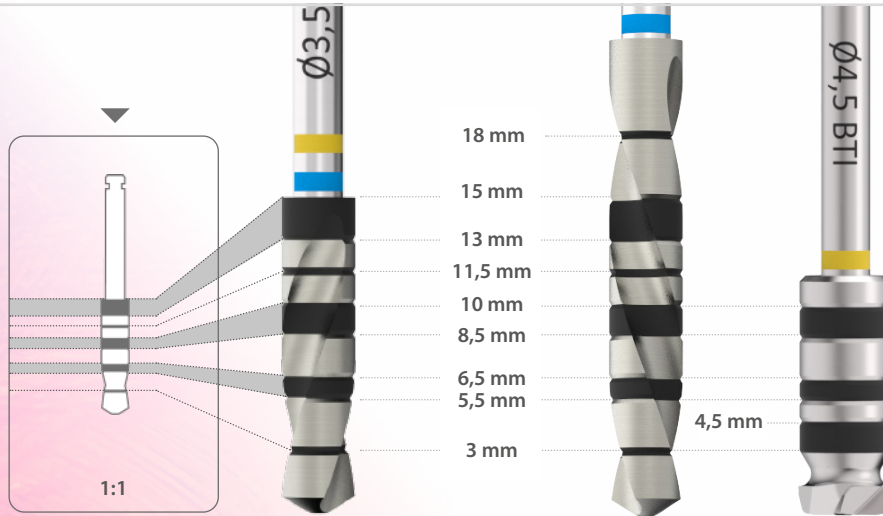

Besorolás/Hounsfield

I1050 - 1400

II850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

FÚRÓ

Előfúró

Fúró

Marófúró

Vágóéles fúrók

FORDULAT

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

ÖBLÍTÉS

igen

nem

nem

nem



Implantátum hossza

(10 - 15 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hosszának 75%-a
- Az implantátum teljes hosszának 25%-a
- 5,0 mm-es fúrásmélység



fúrási lépésekhez
Útmutató a




Implantátum hossza

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 5 mm-es fúrásmélység (nem használható 4,5 mm-es hosszúságban)

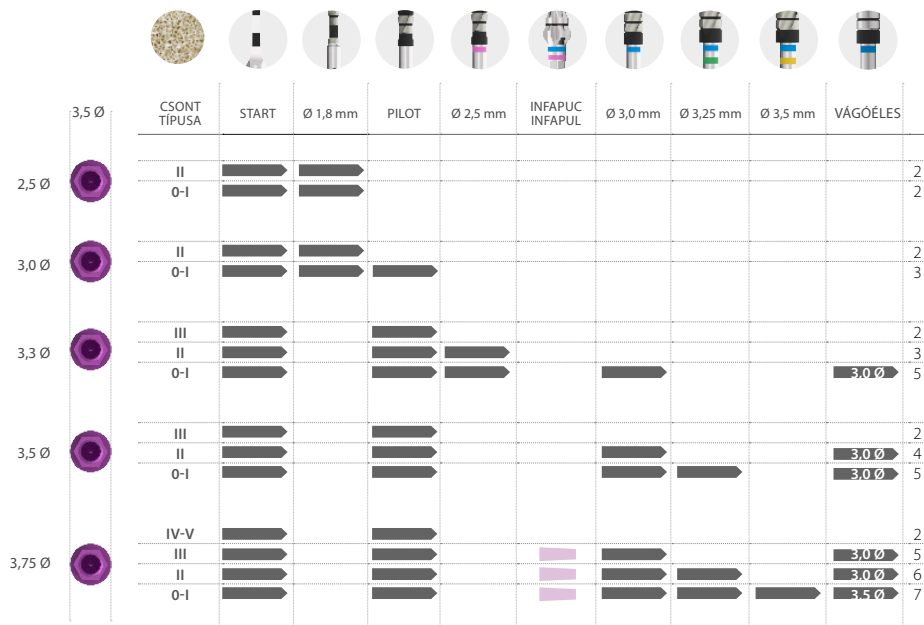



Implantátum hossza

(10 - 15 mm)



-  Az implantátum teljes hossza
-  Az implantátum teljes hosszának 75%-a
-  Az implantátum teljes hosszának 25%-a
-  5,0 mm-es fúrásmélység




	CSONT TÍPUSA	START	PILOT	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	
4,1 Ø	V								2
	IV								2
3,75 Ø	III								4
	II								5
	0-I								6
4,0 Ø	V								2
	IV								4
	III								5
	II								6
	0-I								7



Implantátum hossza

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 5,0 mm-es fúrásmélység
- 2-3 mm-es fúrásmélység

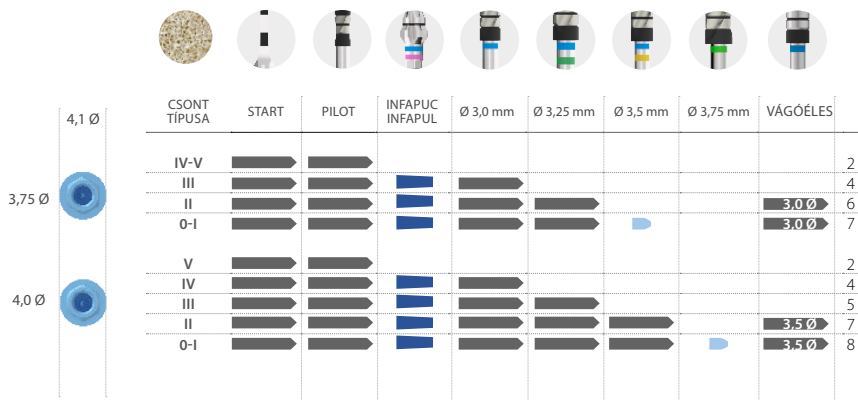

Universal Platform

Platform átmérője Ø4,1 mm


fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(10 - 15 mm)



-  Az implantátum teljes hossza
-  Az implantátum teljes hosszának 75%-a
-  Az implantátum teljes hosszának 25%-a
-  4,5 mm-es fúrásmélység

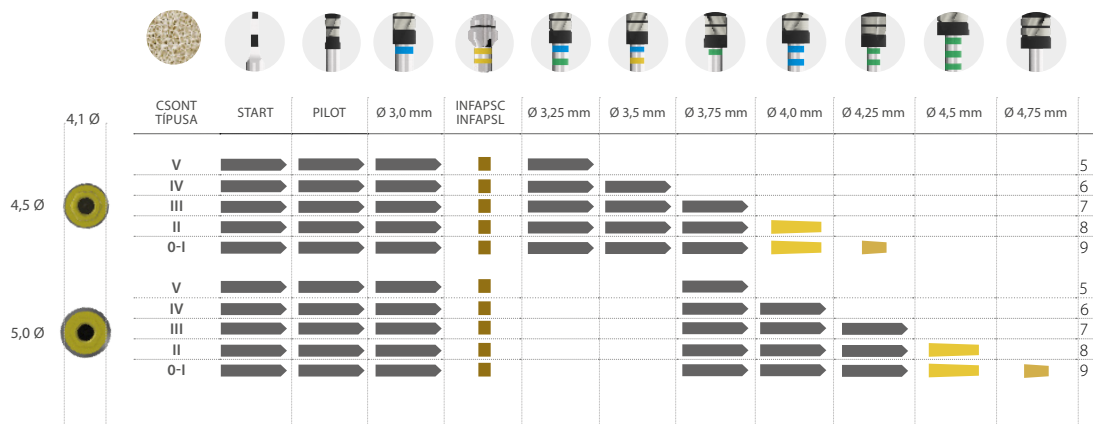

Útmutató a fúrási lépésekhez



Implantátum hossza

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 4,5 mm-es fúrás mélység

