


Útmutató az ajánlott fúrási lépésekről

az Externa BTI implantátumokhoz



MEGJEGYZÉS: a termék elérhetőségéről a különböző piacokon érdeklődjön a forgalmazónál

Fúrásmélység-jelek

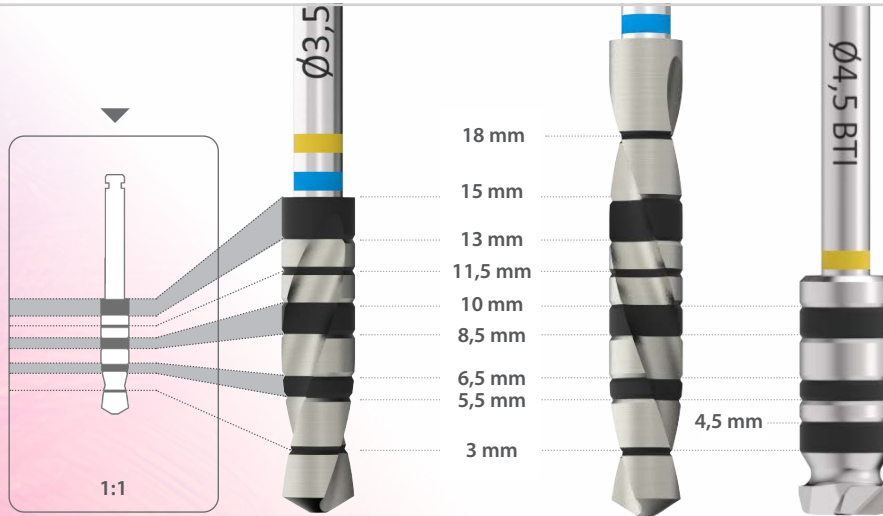

BESOROLÁS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

FÚRÓ

Előfúró
Fúró
Marófúró
Vágóéles fúrók

FORDULAT

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

ÖBLÍTÉS

igen
nem
nem
nem



Implantátum hossza

(10 - 15 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hosszának 75%-a
- Az implantátum teljes hosszának 25%-a
- 5,0 mm-es fúrásmélység






Implantátum hossza

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 5 mm-es fúrásmélység (nem használható 4,5 mm-es hosszúságban)

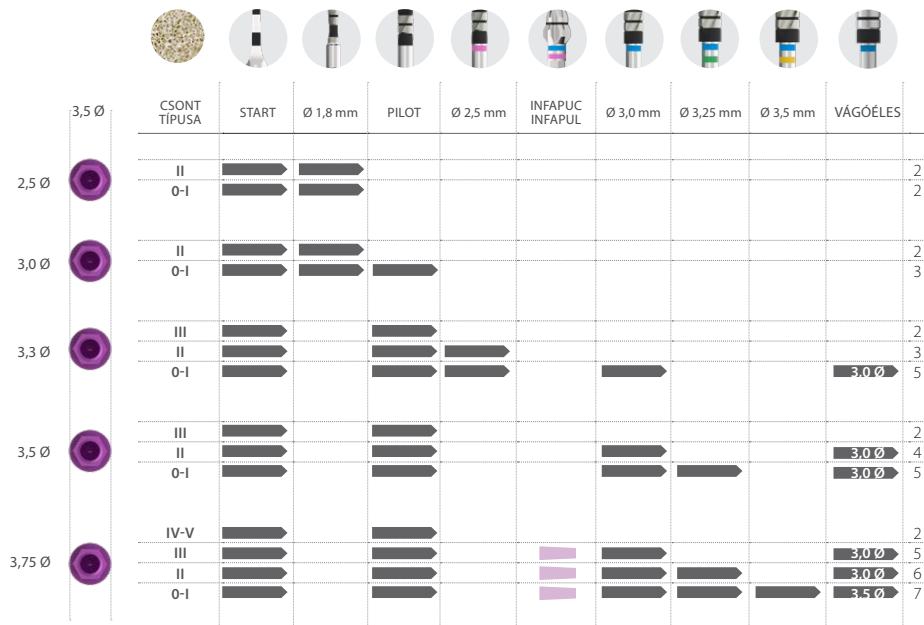



Implantátum hossza

(10 - 15 mm)



-  Az implantátum teljes hossza
-  Az implantátum teljes hosszának 75%-a
-  Az implantátum teljes hosszának 25%-a
-  5,0 mm-es fúrásmélység




	CSONT TÍPUSA	START	PILOT	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	
4,1 Ø	V								2
	IV								2
3,75 Ø	III								4
	II								5
	0-I								6
4,0 Ø	V								2
	IV								4
	III								5
	II								6
	0-I								7

Implantátum hossza

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

-  Az implantátum teljes hossza
-  Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
-  5,0 mm-es fúrásmélység
-  2-3 mm-es fúrásmélység

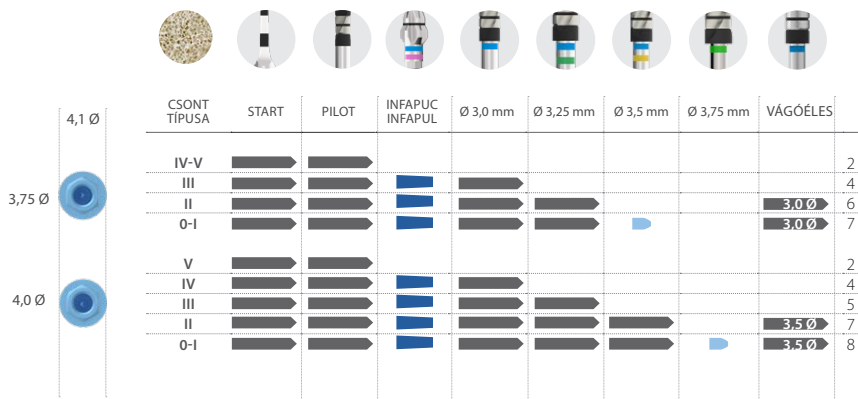


fúrási lépésekhez
Útmutató a

Implantátum hossza

(10 - 15 mm)



-  Az implantátum teljes hossza
-  Az implantátum teljes hosszának 75%-a
-  Az implantátum teljes hosszának 25%-a
-  4,5 mm-es fúrásmélység

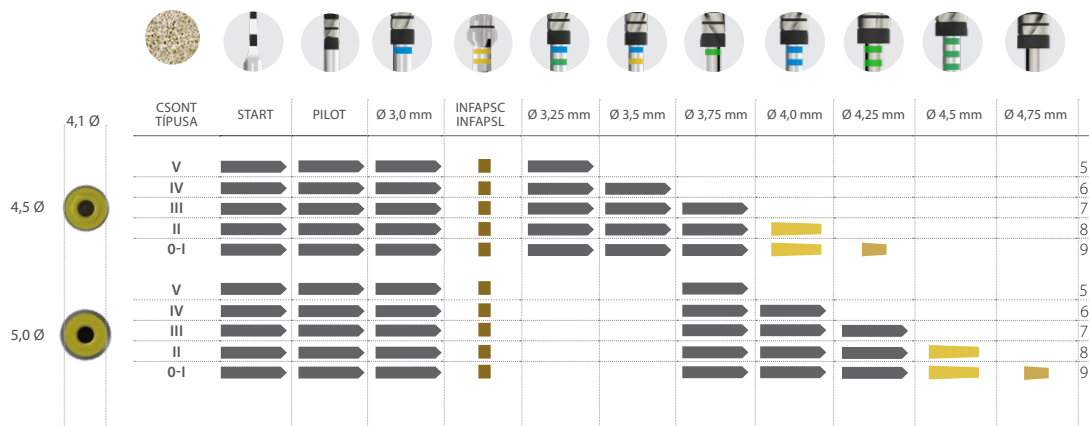


Útmutató a fúrási lépésekhez



Implantátum hossza

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Az implantátum teljes hossza
- Az implantátum teljes hossza a megadott átmérőjű fúróval
- 4,5 mm-es fúrásmélység

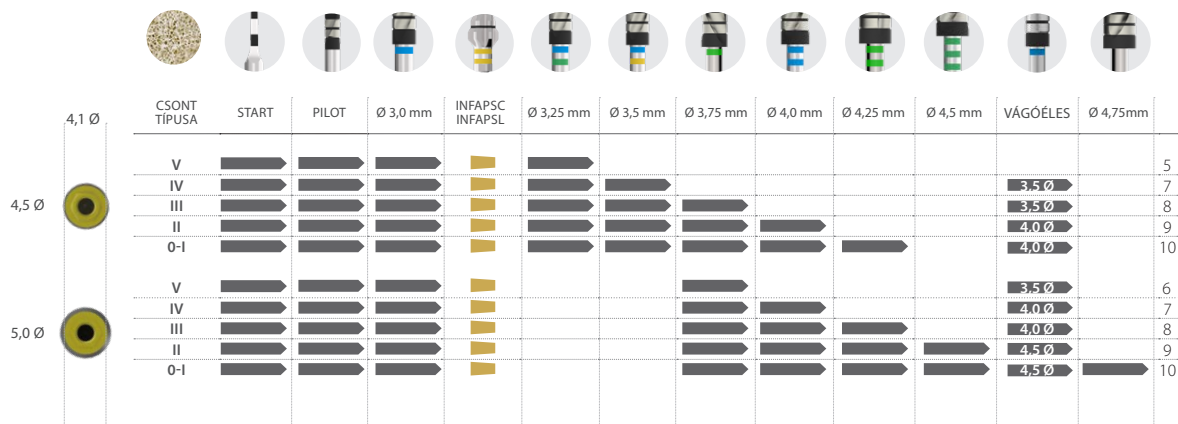

Universal Plus Platform
Platform átmérője Ø4,1 mm

fúrási lépésekhez
Útmutató a

