


# Rekomenduojamas gręžimo sekos vadovas

*skirtas Externa BTI implantams*



PASTABA: dėl gaminio prieinamumo skirtingose rinkose kreipkitės į platintoją

# Gręžimo gylio žymės

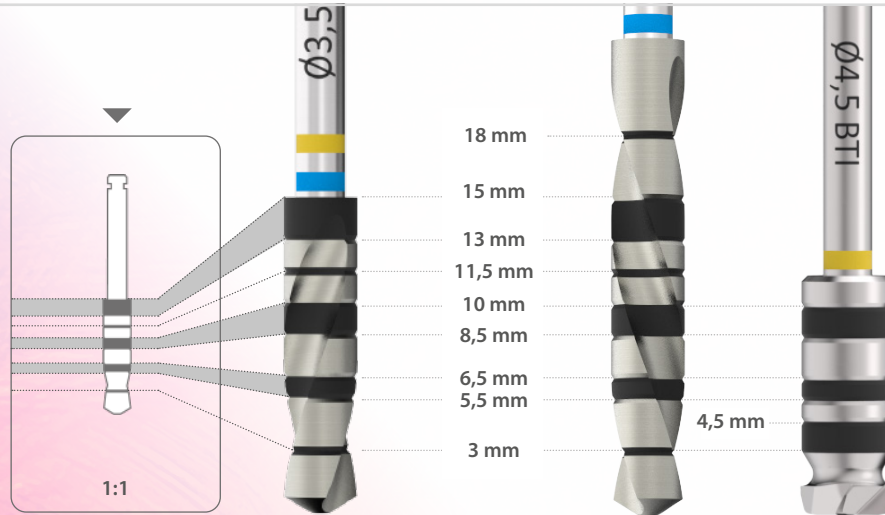

## Klasė/Hounsfield

I ..... 1050 - 1400

II ..... 850 - 1000

III ..... 550 - 800

IV ..... 400 - 500

V ..... 100 - 350

## GRĘŽTUVAS

Pradinis gręžtuvas

Gręžtuvas

Latakų gręžtuvas

Gręžtuvai priekiniams  
dantims

## APSISUKIMAI

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

## DRĖKINIMAS

taip

ne

ne

ne



# Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)



-  Bendras implanto ilgis
-  75 % viso implanto ilgio
-  25 % viso implanto ilgio
-  5,0 mm gręžimo gylis






# Implanto ilgis

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Bendras implanto ilgis
- Bendras implanto ilgis su nurodytu skersmens gręžtuvu
- 5 mm gręžimo gylis (nenaudoti 4,5 mm ilgiui)

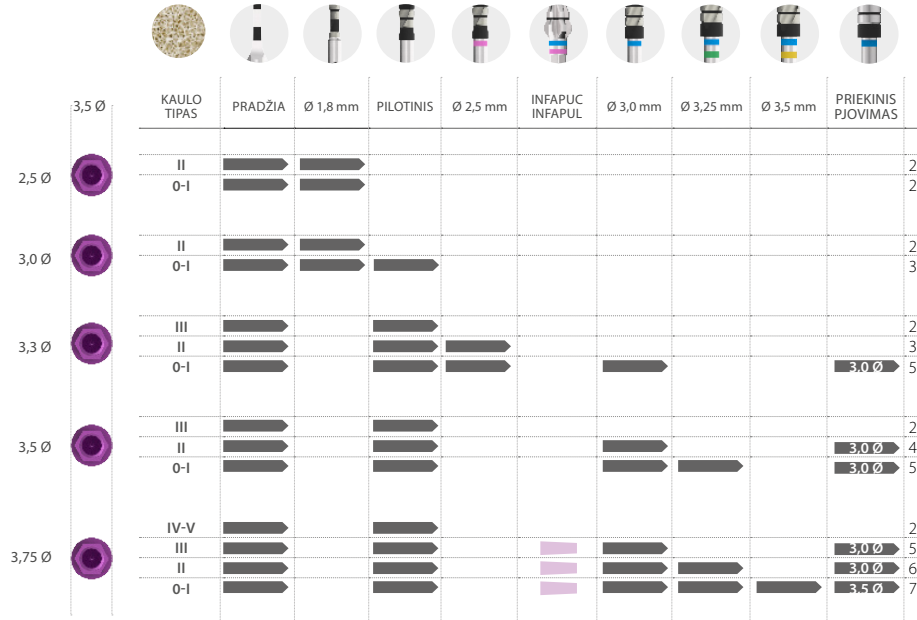



# Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)

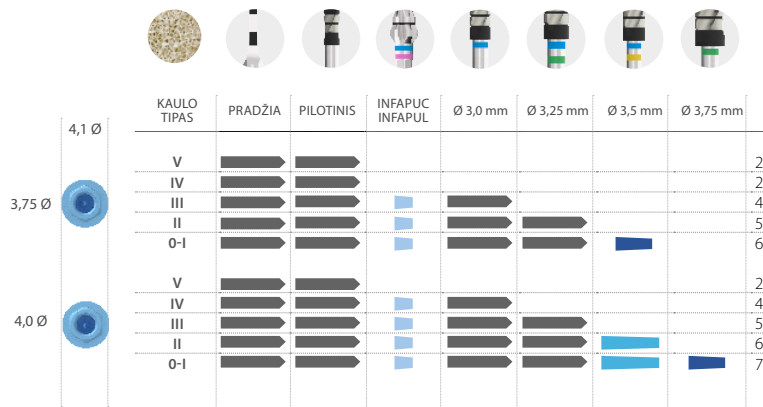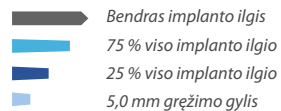



# Implanto ilgis

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



Bendras implanto ilgis




Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu



5,0 mm gręžimo gylis



2-3 mm gręžimo gylis

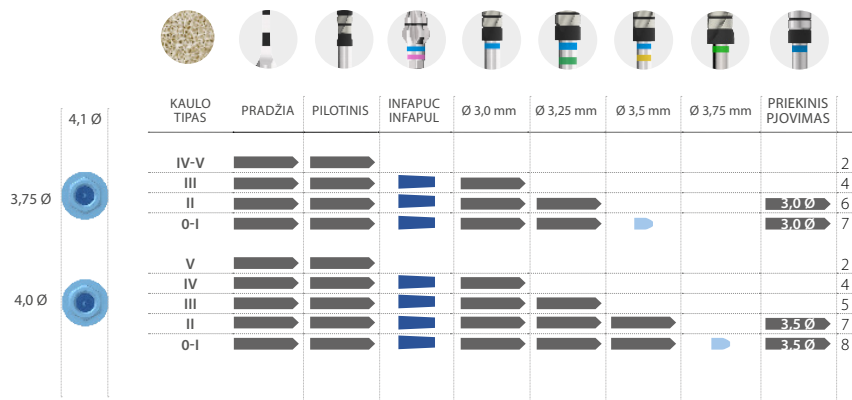


# Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)



-  Bendras implanto ilgis
-  75 % viso implanto ilgio
-  25 % viso implanto ilgio
-  4,5 mm gręžimo gylis

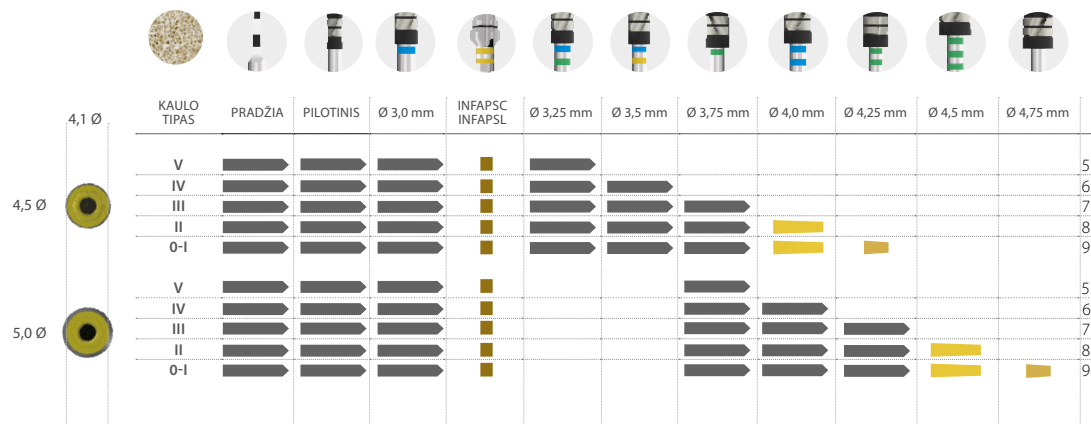

# Implanto ilgis

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Bendras implanto ilgis  
 Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu  
 4,5 mm gręžimo gylis

