


Rekomenduojamas gręžimo sekos vadovas

skirtas Externa BTI implantams



PASTABA: dėl gaminio prieinamumo skirtingose rinkose kreipkitės į platintoją

Gręžimo gylio žymės

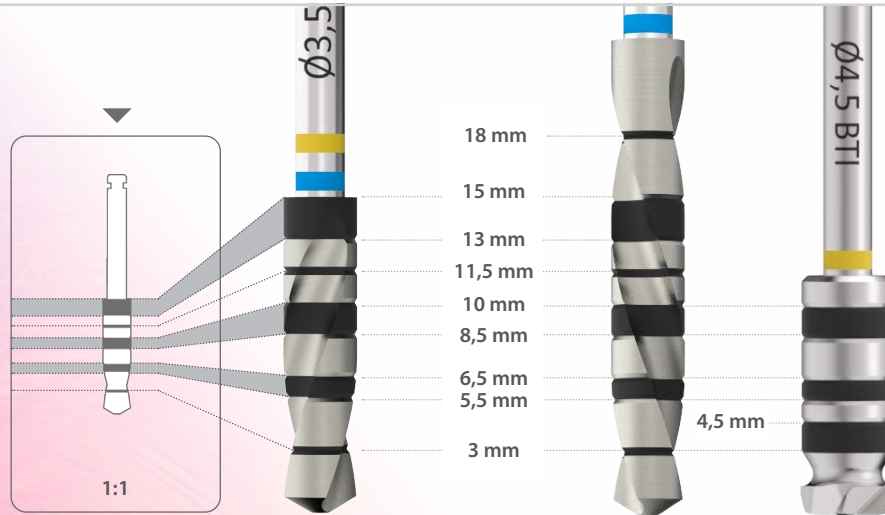

KLASĖ / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

GRĘŽTUVAS

Pradinis gręžtuvas
Gręžtuvas
Latakų gręžtuvas
Gręžtuvai priekiniams
dantims

APSISUKIMAI

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm

DRĖKINIMAS

taip
ne
ne
ne



Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)



-  Bendras implanto ilgis
-  75 % viso implanto ilgio
-  25 % viso implanto ilgio
-  5,0 mm gręžimo gylis






Implanto ilgis

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



-  Bendras implanto ilgis
-  Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
-  5 mm gręžimo gylis (nenaudoti 4,5 mm ilgiui)

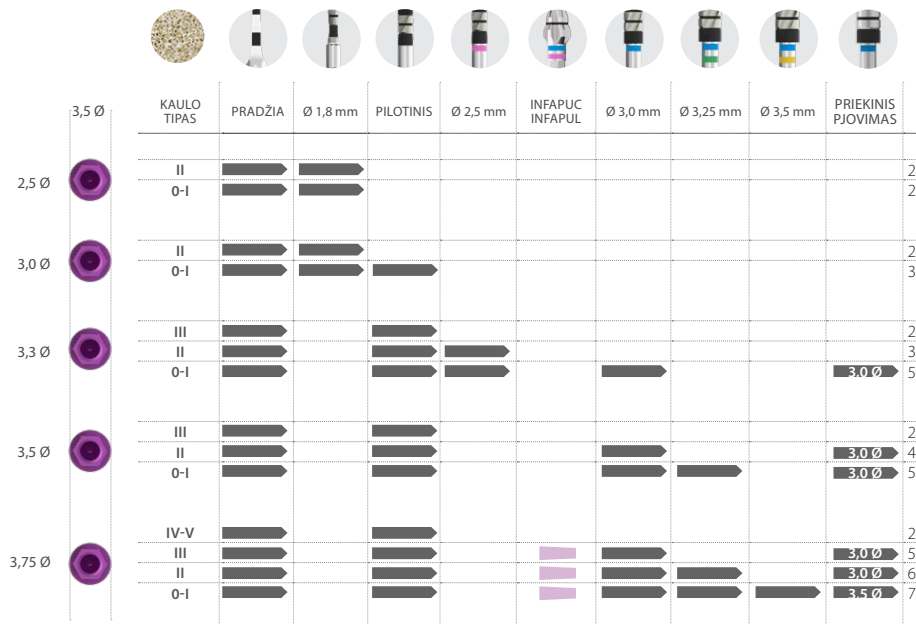



Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)

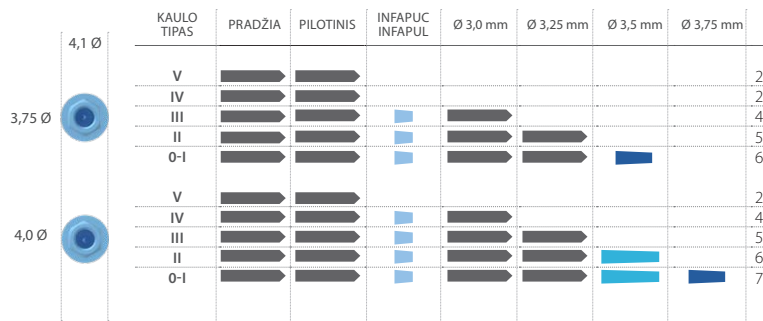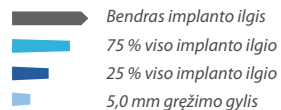



Implanto ilgis

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



Bendras implanto ilgis



Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu



5,0 mm gręžimo gylis



2-3 mm gręžimo gylis




	KAULO TIPAS	PRADŽIA	PILOTINIS	INFAPUC INFAPUL	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	PRIEKINIS PJOVIMAS	
4,1 Ø										
3,75 Ø	IV-V									2
	III									4
	II								3,0 Ø	6
	0-I								3,0 Ø	7
	V									2
4,0 Ø	IV									4
	III									5
	II								3,5 Ø	7
	0-I								3,5 Ø	8

Implanto ilgis

(nuo 10 iki 15 mm)

- Bendras implanto ilgis
- 75 % viso implanto ilgio
- 25 % viso implanto ilgio
- 4,5 mm gręžimo gylis

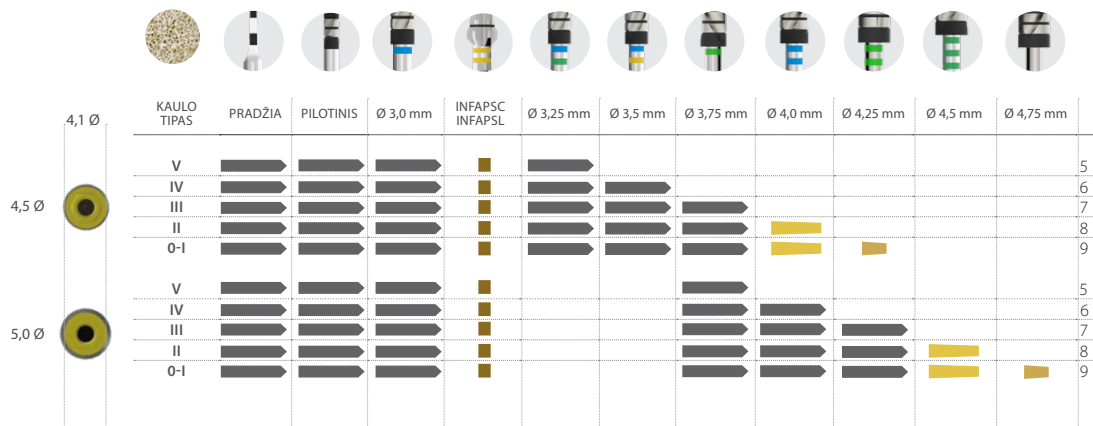

Implanto ilgis

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Bendras implanto ilgis
 Bendras implanto ilgis su nurodyto skersmens gręžtuvu
 4,5 mm gręžimo gylis

