



Leteicamā urbšanas secības rokasgrāmata

Externa BTI implantiem



PIEZĪME: konsultējieties ar izplatītāju par produkta pieejamību dažādos tirgos

Urbšanas dziļuma atzīmes

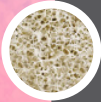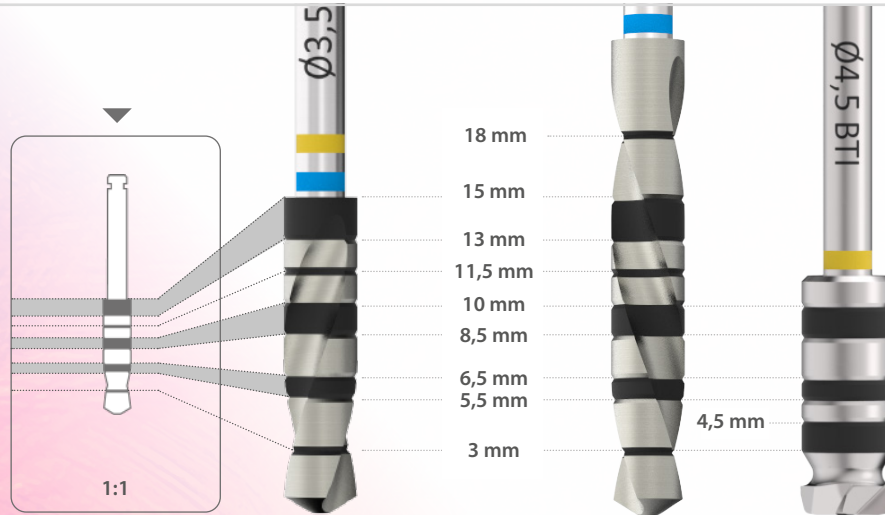

Klase/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

URBIS

Sākotnējais urbis

Urbis

Izlīdzināšanas urbis

Priekšējās griešanās urbj

APGRIEZIENI

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRIGĀCIJA

jā

nē

nē

nē



Implanta garums

(no 10 līdz 15 mm)

- Implanta kopējais garums
- 75 % no implanta kopējā garuma
- 25 % no implanta kopējā garuma
- 5,0 mm urbšanas dziļums








Implanta garums

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Implanta kopējais garums
- X,X Ø Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 5 mm uršanas dziļums (nelietot 4,5 mm garumā)

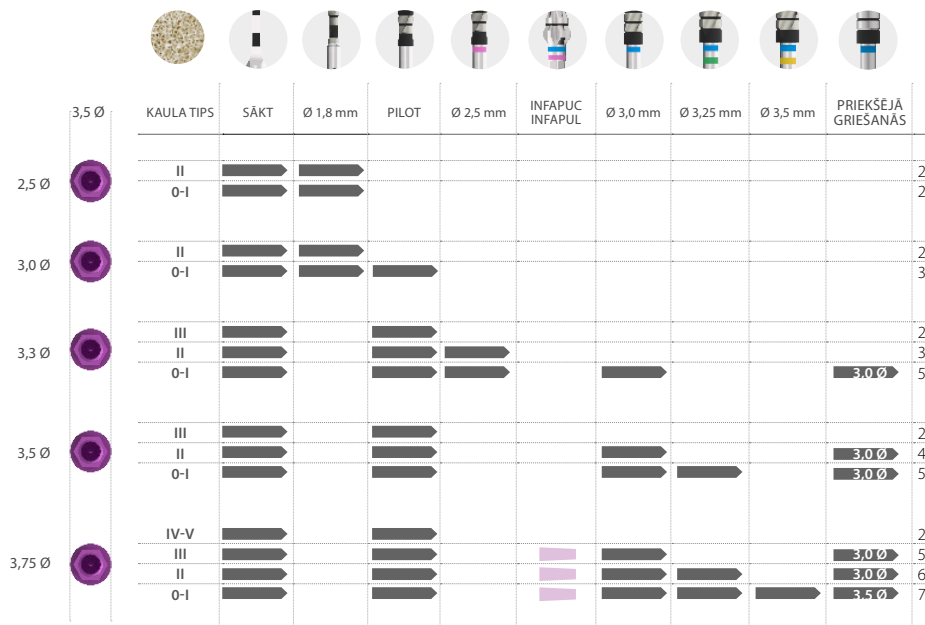


Implanta garums (no 10 līdz 15 mm)

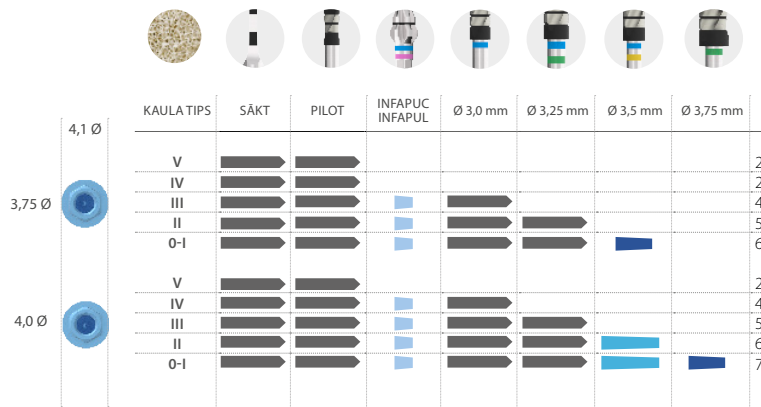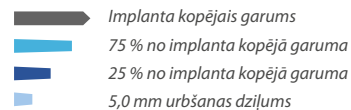

Implanta garums


(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Implanta kopējais garums
- Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 5,0 mm urbšanas dziļums
- 2-3 mm urbšanas dziļums

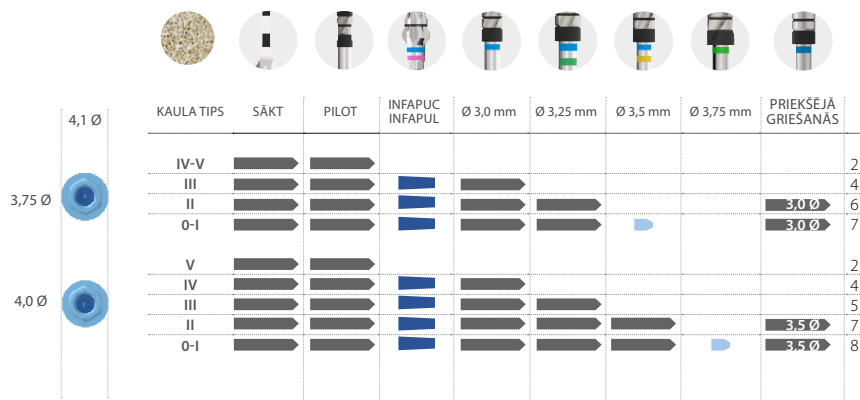

Implanta garums (no 10 līdz 15 mm)

- Implanta kopējais garums
- 75 % no implanta kopējā garuma
- 25 % no implanta kopējā garuma
- 4,5 mm urbšanas dziļums

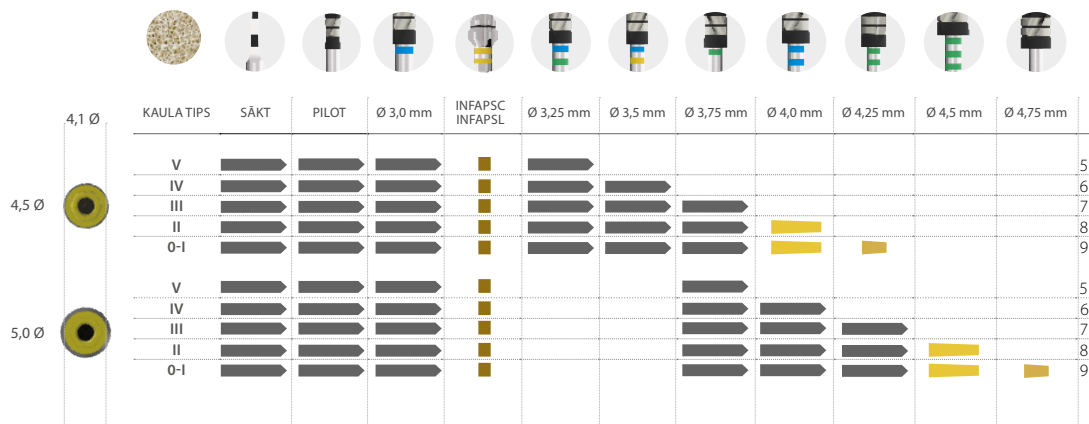

Implanta garums

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Implanta kopējais garums
- X,X Ø Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 4,5 mm urbšanas dziļums

