


Leteicamā urbšanas secības rokasgrāmata

Externa BTI implantiem



PIEZĪME: konsultējieties ar izplatītāju par produkta pieejamību dažādos tirgos

Urbšanas dziļuma atzīmes

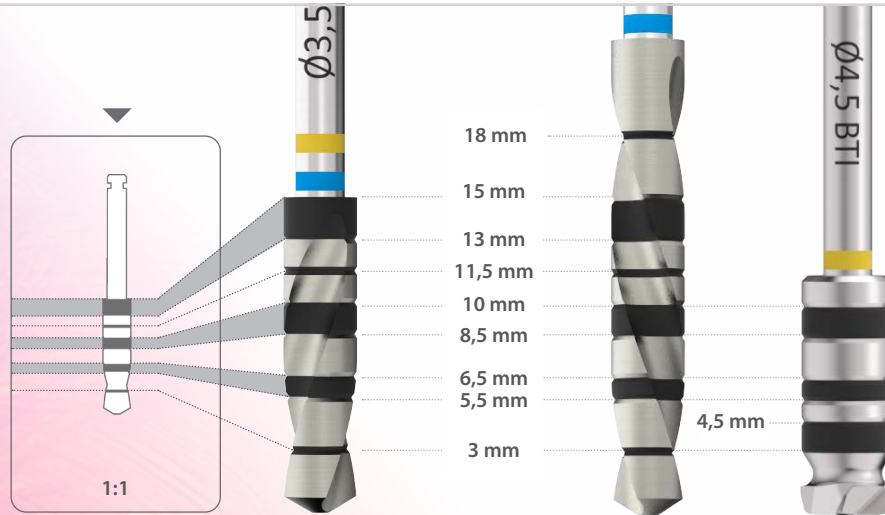

KLASE / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

URBIS

Sākotnējais urbis
 Urbis
 Izlīdzināšanas urbis
 Priekšējās griešanās urbjī

APGRIEZIENI

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

IRIGĀCIJA

jā
 nē
 nē
 nē



Implanta garums

(no 10 līdz 15 mm)

- Implanta kopējais garums
- 75 % no implanta kopējā garuma
- 25 % no implanta kopējā garuma
- 5,0 mm urbšanas dziļums








Implanta garums

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Implanta kopējais garums
- X.X Ø Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 5 mm uršanas dziļums (nelietot 4,5 mm garumā)

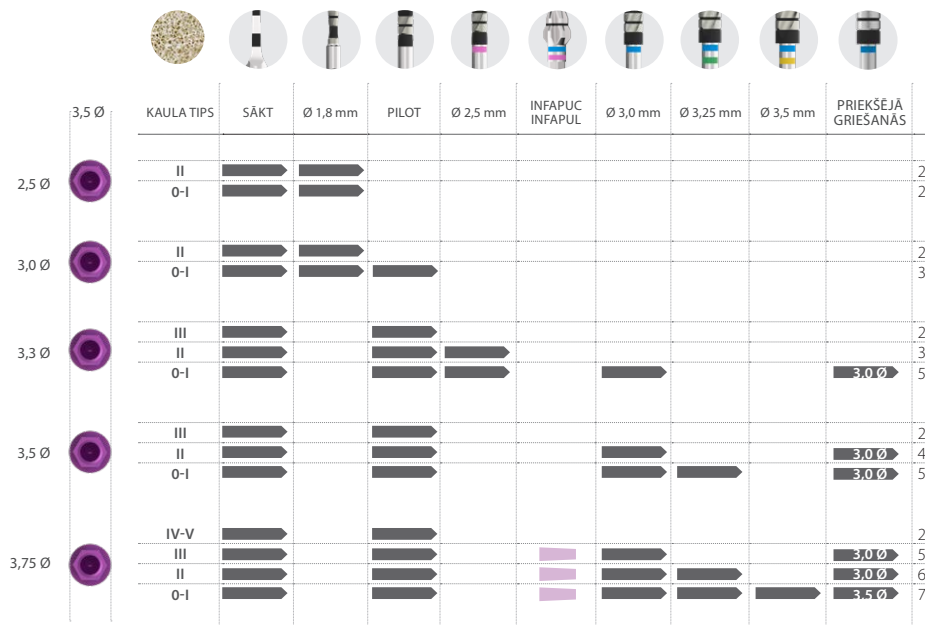

Implanta garums (no 10 līdz 15 mm)

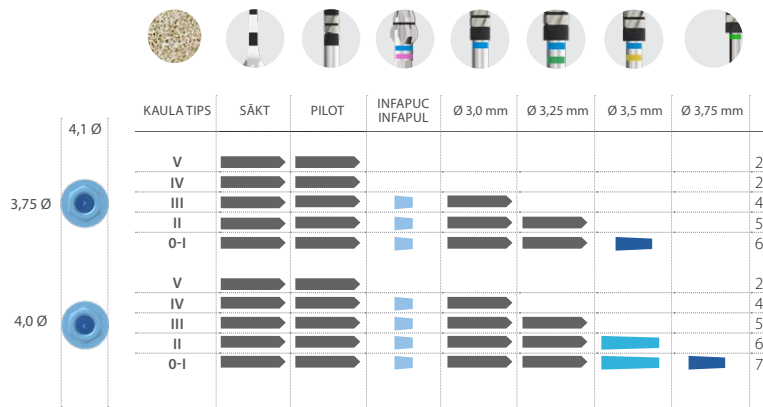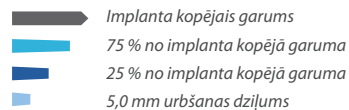


Implanta garums

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)




- Implanta kopējais garums
- Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
- 5,0 mm urbšanas dziļums
- 2-3 mm urbšanas dziļums

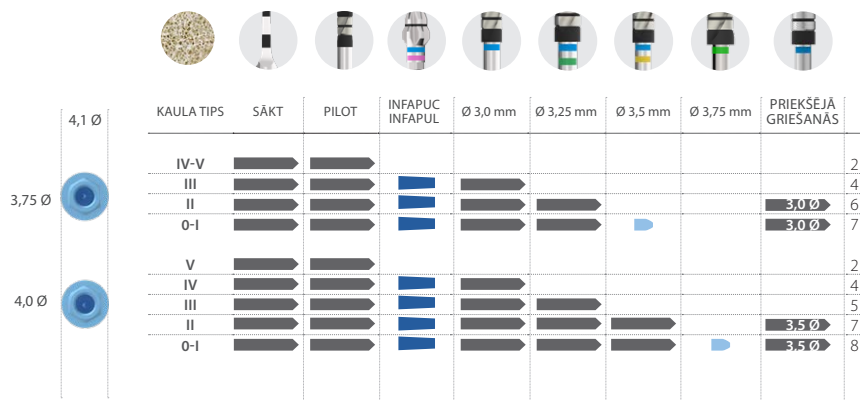

Implanta garums (no 10 līdz 15 mm)

- Implanta kopējais garums
- 75 % no implanta kopējā garuma
- 25 % no implanta kopējā garuma
- 4,5 mm urbšanas dziļums

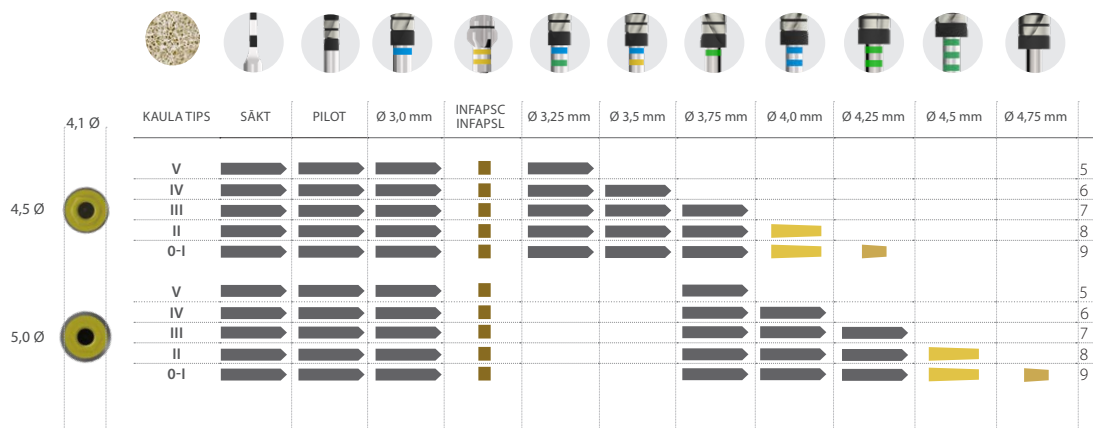

Implanta garums

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



 Implanta kopējais garums
 Implanta kopējais garums ar noteikta diametra urbi
 4,5 mm urbšanas dziļums

