


Protocolo de perfuração recomendado

para implantes de BTI Externa



NOTA: consulte disponibilidade do produto nos diferentes mercados com o seu distribuidor.

Marcas de profundidade de perfuração

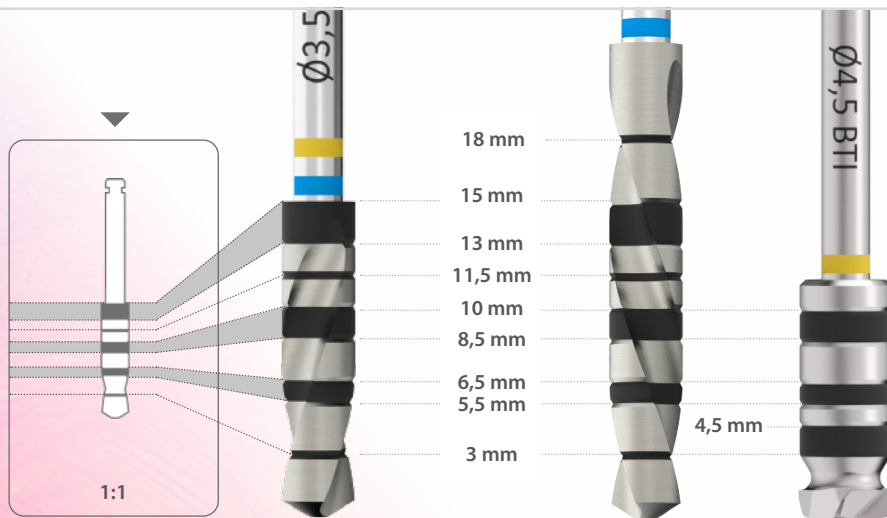

Tipo/Hounsfield

I 1050 - 1400

II 850 - 1000

III 550 - 800

IV 400 - 500

V 100 - 350

BROCAS

Brocas de Início

Brocas helicoidais

Brocas Countersink /
Avellanadoras

Broca corte frontal

VELOCIDADE

800 - 1.000 rpm

50 - 75 rpm

150 - 200 rpm

50 - 75 rpm

IRRIGAÇÃO

sim

não

não

não



Implantes comprimento

(de 10 a 15 mm)

- Comprimento total do implante
- 75 % de comprimento total do implante
- 25 % de comprimento total do implante
- 5,0 mm de profundidade



Plataforma Tiny
Ø 3,5 mm de diâmetro da plataforma




perfuração
Protocolo de





Implantes comprimento

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

Comprimento total do implante
X,X Ø Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
5 mm de profundidade (no usar em longitud de 4,5mm)

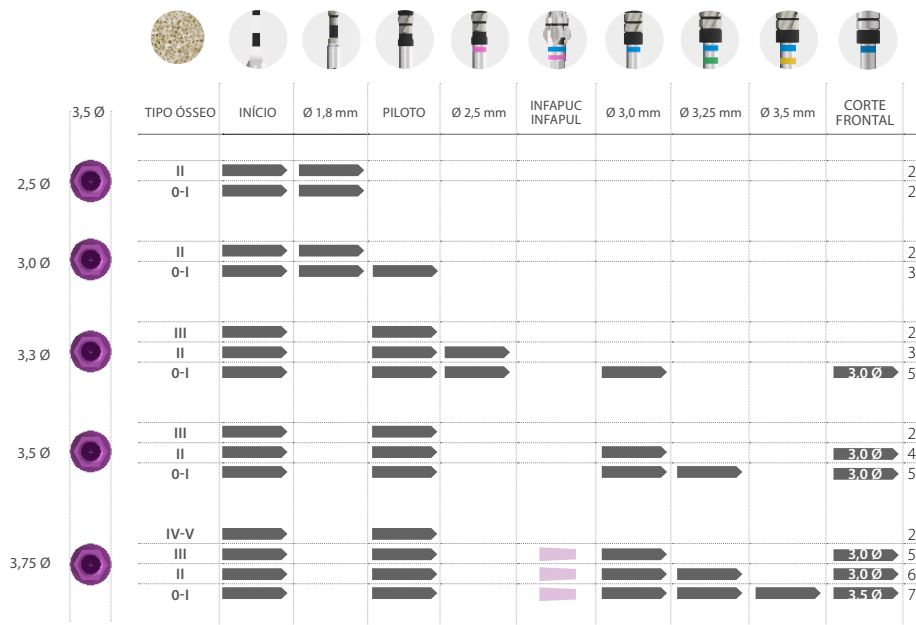


Implantes comprimento (de 10 a 15 mm)

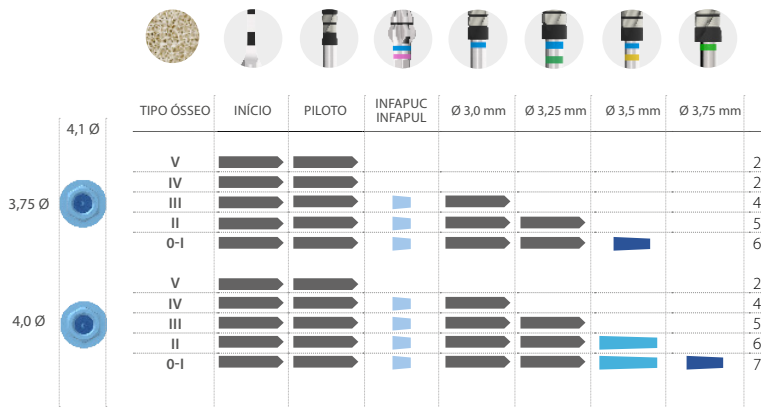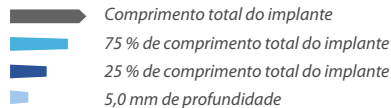

Implantes comprimento (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Comprimento total do implante
- Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
- 5,0 mm de profundidade
- 2-3 mm de profundidade

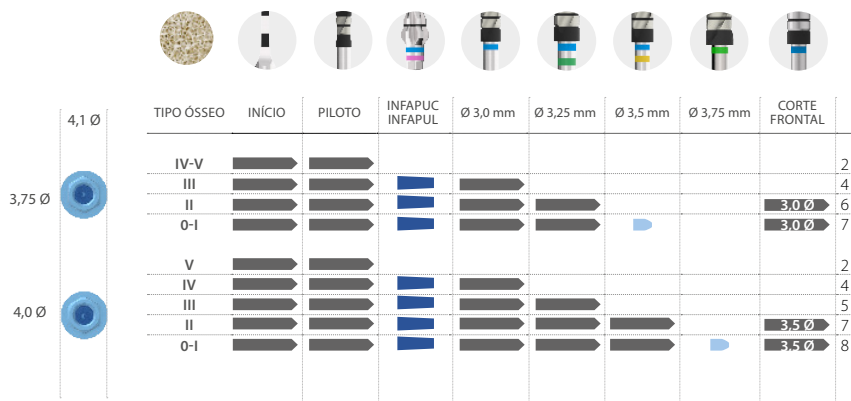

Implantes comprimento (de 10 a 15 mm)



- Comprimento total do implante
- 75 % de comprimento total do implante
- 25 % de comprimento total do implante
- 4,5 mm de profundidade

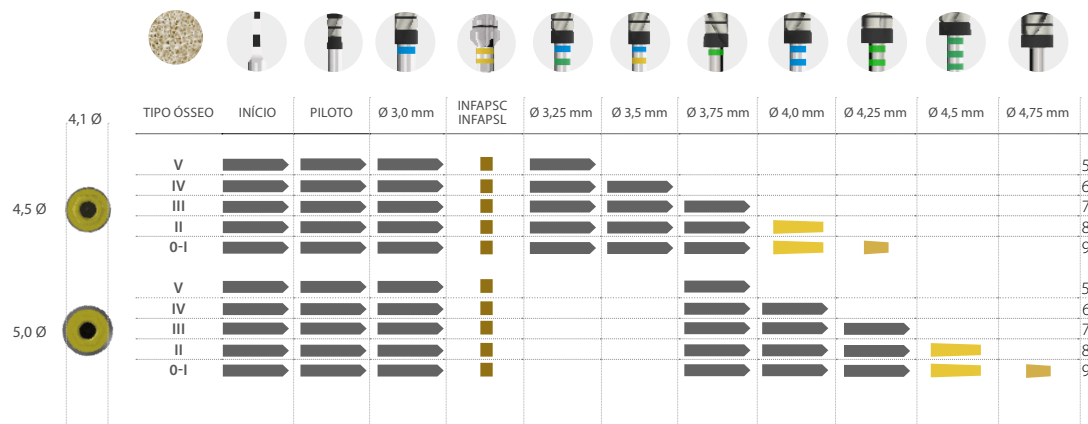

Implantes comprimento (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



 Comprimento total do implante
 Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
 4,5 mm de profundidade

