


Protocolo de perfuração recomendado

para implantes de BTI Externa



NOTA: consulte disponibilidade do produto nos diferentes mercados com o seu distribuidor.

Marcas de profundidade de perfuração

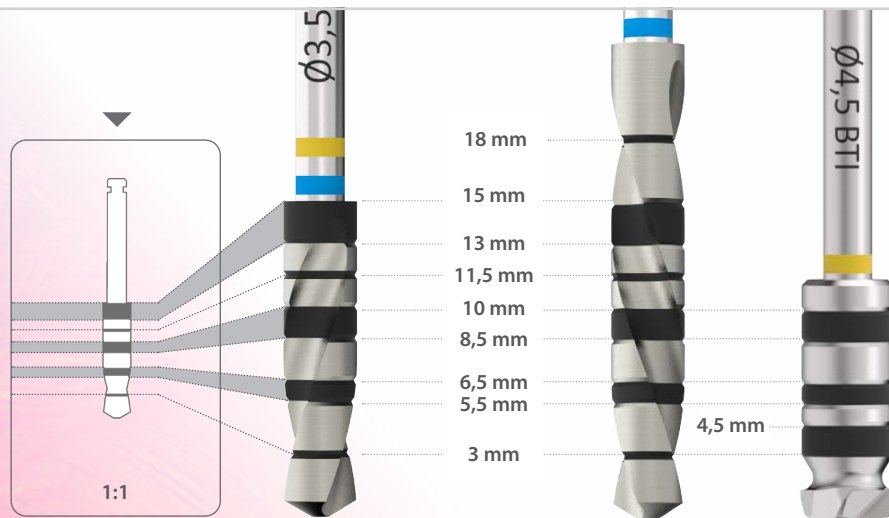

TIPO / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BROCAS

Brocas de Início
 Brocas helicoidais
 Brocas Countersink /
 Avellanadoras
 Broca corte frontal

VELOCIDADE

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

IRRIGAÇÃO

sim
 não
 não
 não



Implantes comprimento (de 10 a 15 mm)

- Comprimento total do implante
- 75 % de comprimento total do implante
- 25 % de comprimento total do implante
- 5,0 mm de profundidade








Implantes comprimento

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Comprimento total do implante
- X,X Ø Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
- 5 mm de profundidade (no usar em longitud de 4,5mm)

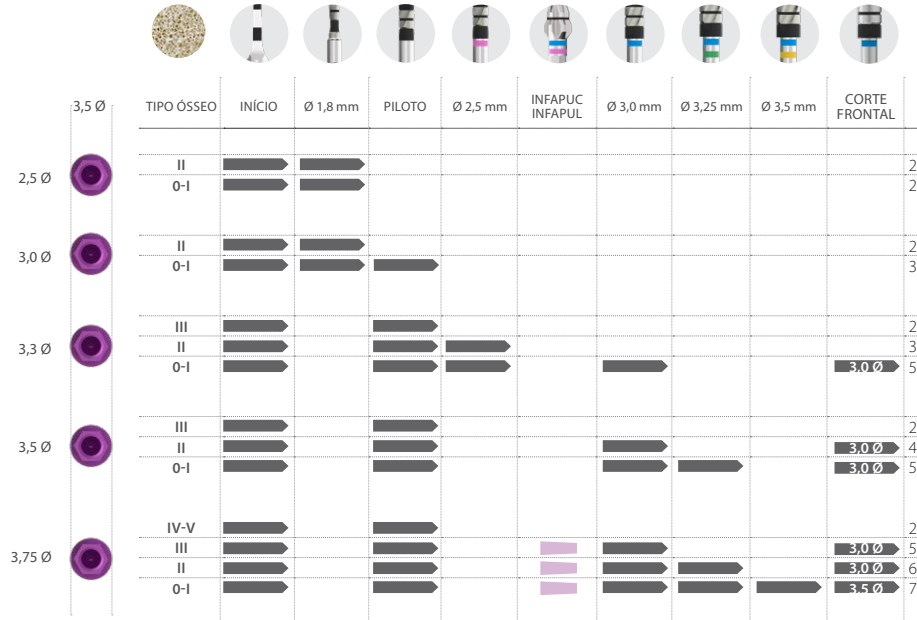


Implantes comprimento (de 10 a 15 mm)

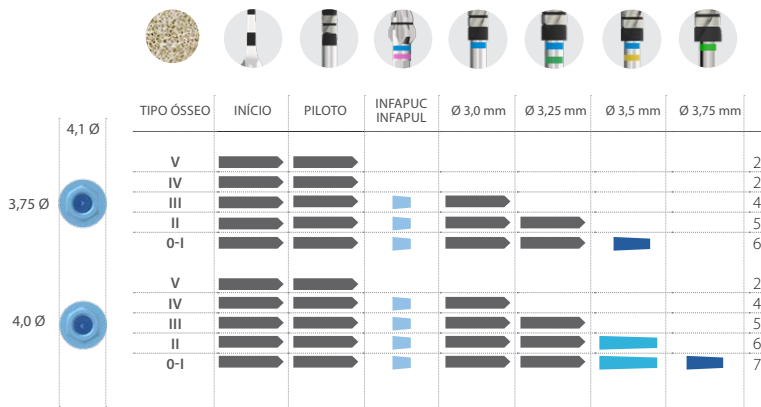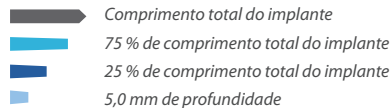

Implantes comprimento (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Comprimento total do implante
- Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
- 5,0 mm de profundidade
- 2-3 mm de profundidade

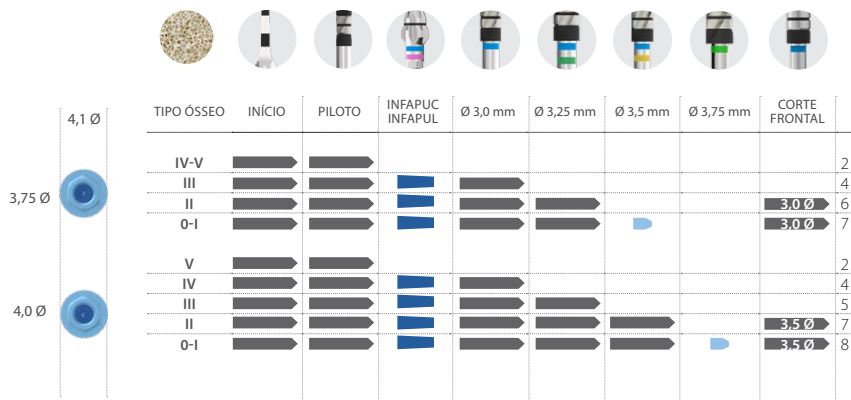

Implantes comprimento (de 10 a 15 mm)



- Comprimento total do implante
- 75 % de comprimento total do implante
- 25 % de comprimento total do implante
- 4,5 mm de profundidade

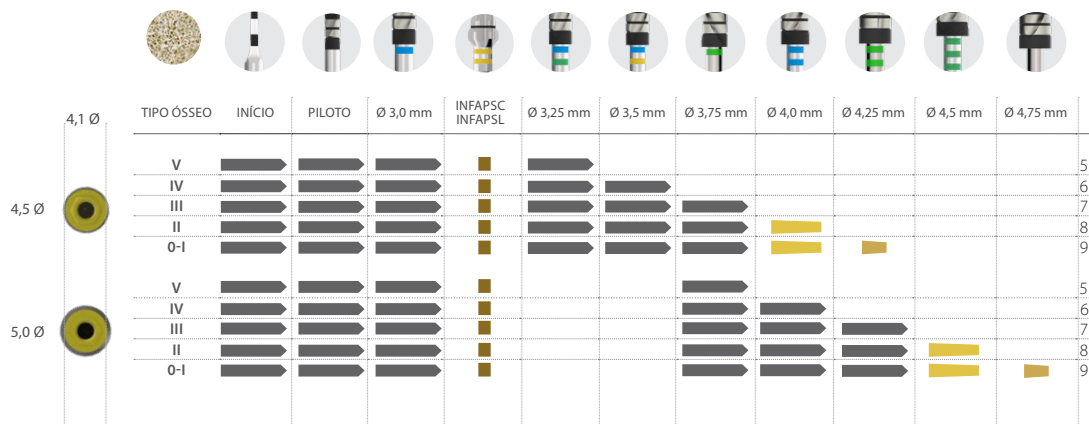

Implantes comprimento (6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



 Comprimento total do implante
 Comprimento total do implante com a broca de diâmetro especificado
 4,5 mm de profundidade

