


Ghid de secvență de găurire recomandat

pentru implanturile BTI Externa



NOTĂ: consultați distribuitorul dvs. pentru disponibilitatea produsului pe diferite piețe.

Semne de adâncime a burghiului

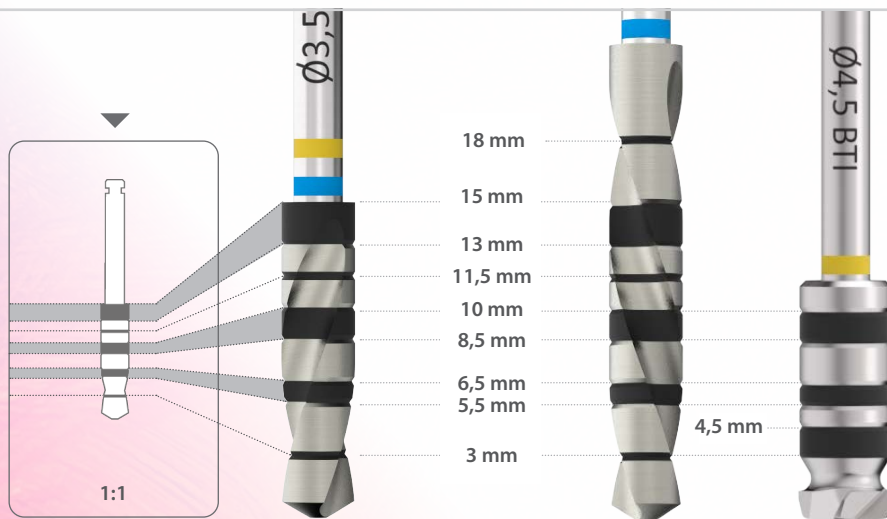

CLASĂ / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BURGHIU

Burghiu inițial
Burghiu
Burghiu conic
Burghie cu tăiere
frontală

ROTAȚII

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
0 - 75 rpm

IRIGARE

da
nu
nu
nu



Lungimea implantului (de la 10 to 15 mm)



-  Lungimea totală a implantului
-  75 % din lungimea totală a implantului
-  25 % din lungimea totală a implantului
-  5,0 mm adâncime de găurire








Lungimea implantului

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Lungimea totală a implantului
- Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
- 5 mm adâncime de găurire (a nu se utiliza la o lungime de 4,5 mm)

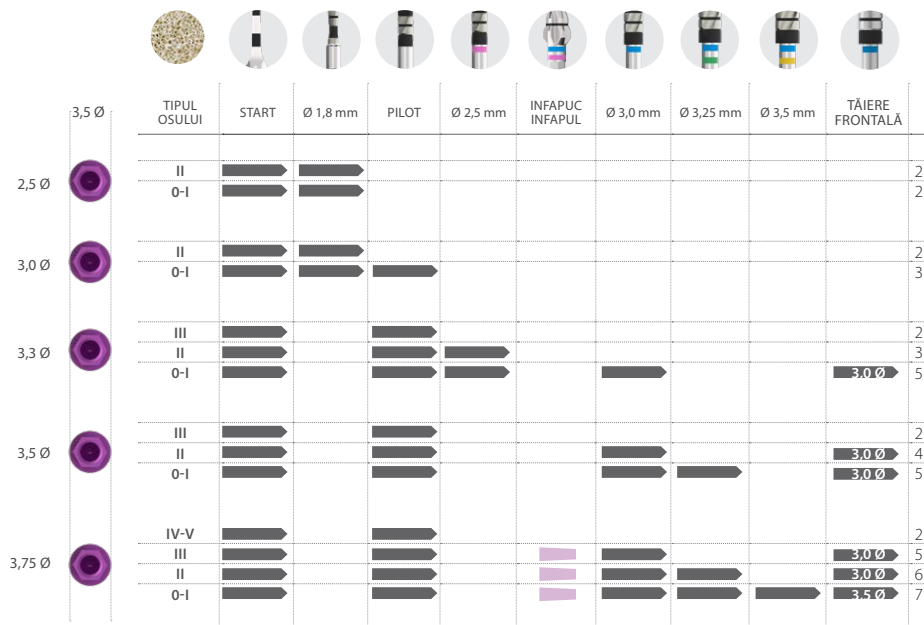

Lungimea implantului (de la 10 to 15 mm)

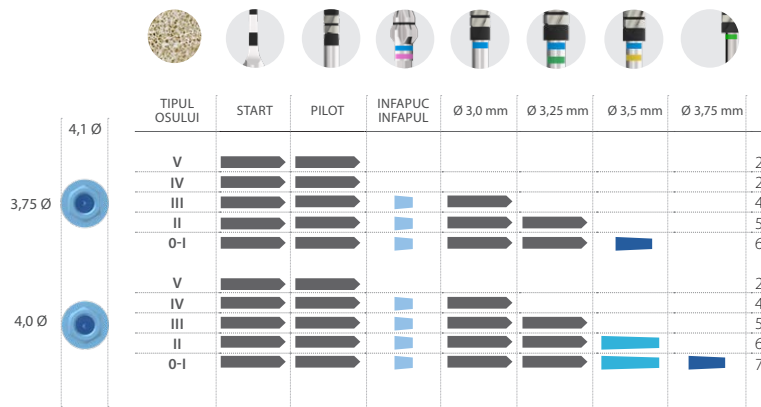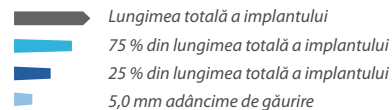




Lungimea implantului

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)


- Lungimea totală a implantului
- $X \cdot X \cdot \emptyset$ 75 % of the total length of the implant
- 5,0 mm adâncime de găurire
- 2-3 mm adâncime de găurire

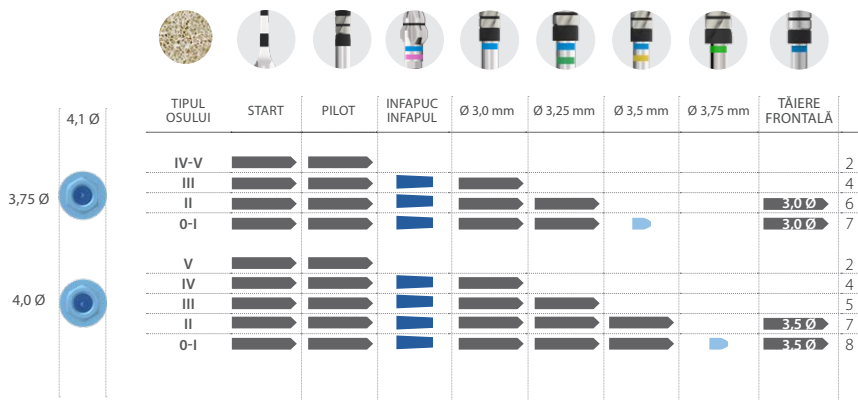

Lungimea implantului (de la 10 to 15 mm)



- Lungimea totală a implantului
- 75 % din lungimea totală a implantului
- 25 % din lungimea totală a implantului
- 4,5 mm adâncime de găurire

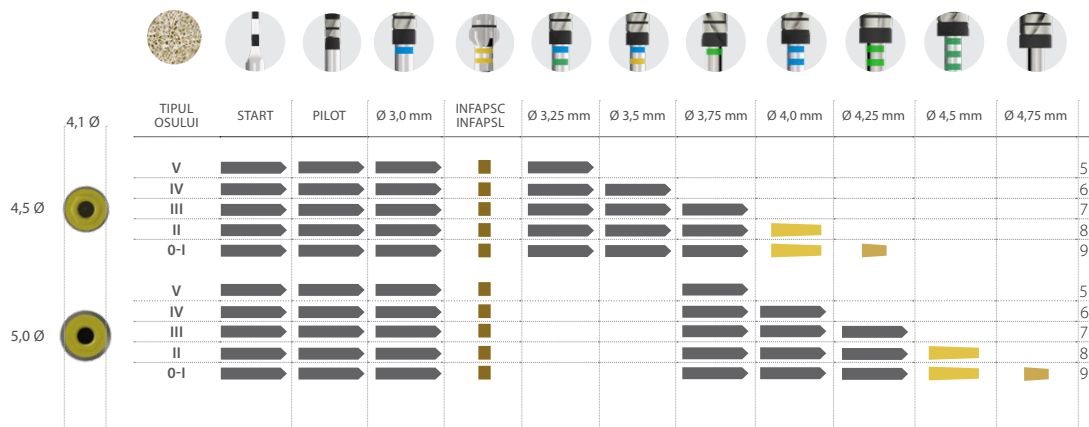

Lungimea implantului

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Lungimea totală a implantului
 Lungimea totală a implantului cu burghiul cu diametrul specificat
 4,5 mm adâncime de găurire

