


Guide till rekommenderad borrningssekvens

för Externa BTI-implantat



OBS: kontakta din distributör för information om produktens tillgänglighet på de olika marknaderna

Borrdjupsmarkeringar

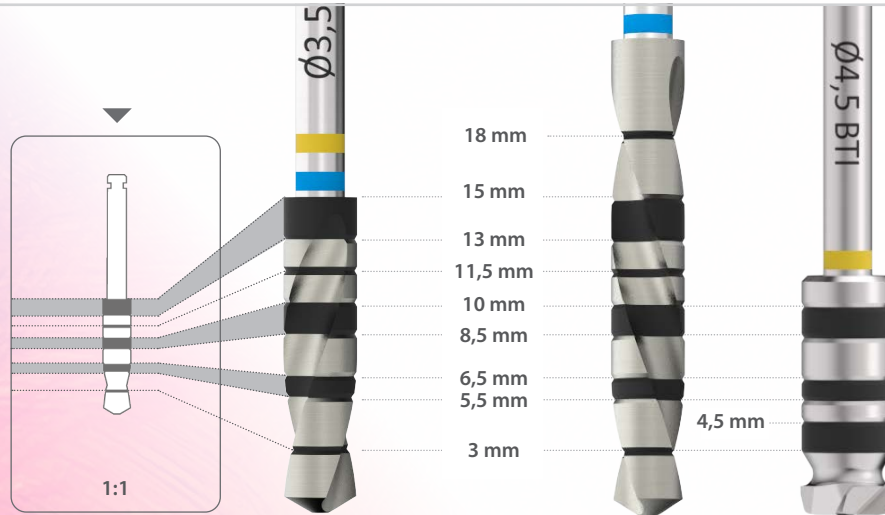

KLASS / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

BORR

Inledande borrar
 Borr
 Borr för försänkning
 Främre skärborrar

VARVTAL

800 - 1.000 rpm
 50 - 75 rpm
 150 - 200 rpm
 50 - 75 rpm

SKÖLJNING

ja
 nej
 nej
 nej



Implantatlängder

(från 10 till 15 mm)

- Implantatets totala längd
- 75 % av implantatets totala längd
- 25 % av implantatets totala längd
- 5,0 mm borrhjup






Implantatlängder

(4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5 - 8,5 mm)



- Implantatets totala längd
- X,X Ø Implantatets totala längd med borr med specificerad diameter
- 5 mm borrhjup (ska inte användas i 4,5 mm längd)

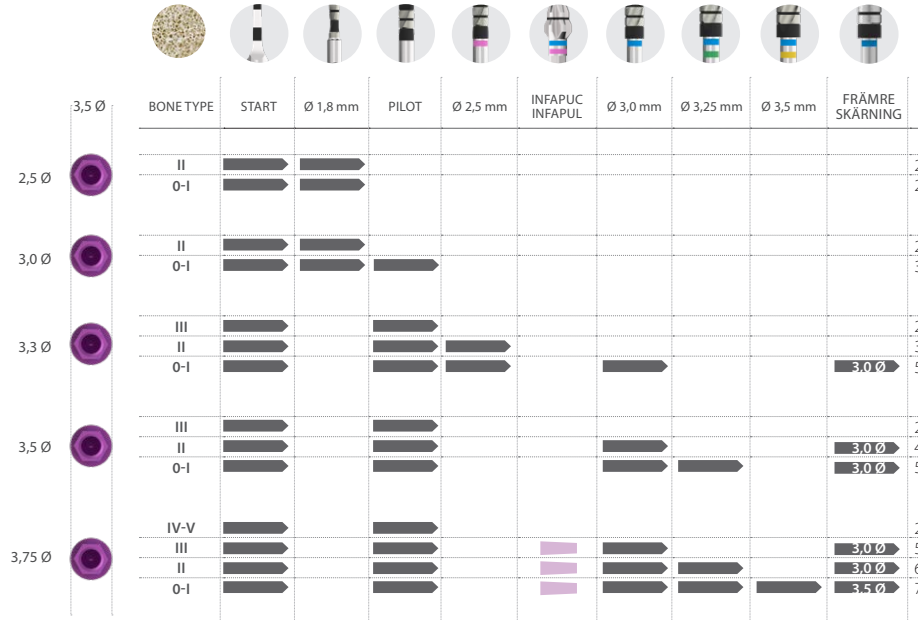



Implantatlängder

(från 10 till 15 mm)

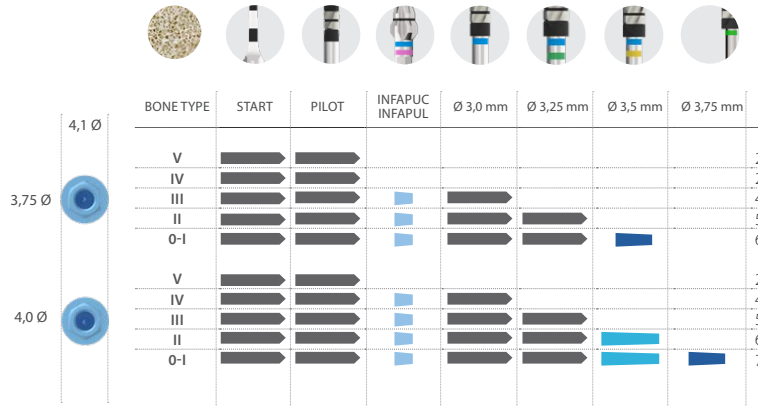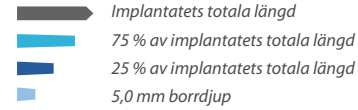




Implantatlängder

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

- Implantatets totala längd
- Implantatets totala längd med borrhål med specificerad diameter
- 5,0 mm borrhål
- 2-3 mm borrhål

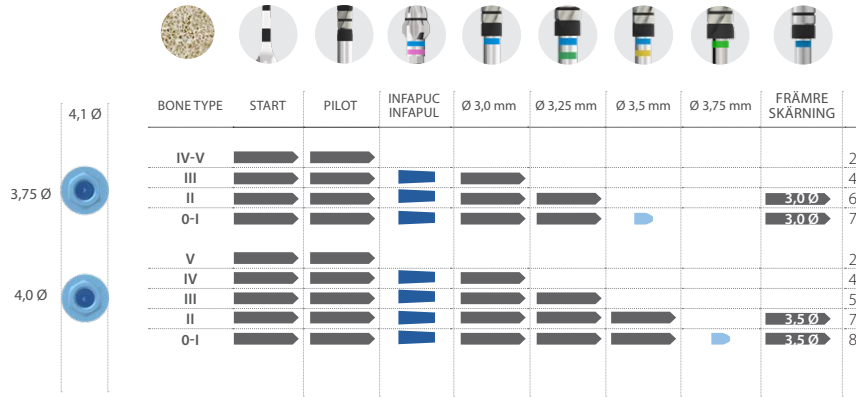


Implantatlängder

(från 10 till 15 mm)



-  Implantatets totala längd
-  75 % av implantatets totala längd
-  25 % av implantatets totala längd
-  4,5 mm borrhjup

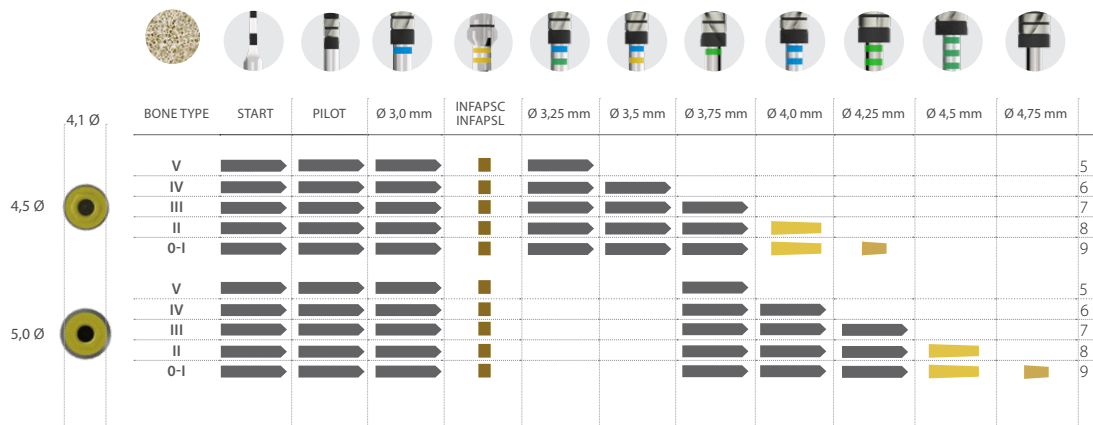

Implantatlängder

(6,5 - 7,5 - 8,5 mm)

 Implantatets totala längd
 Implantatets totala längd med borrh med specificerad diameter
 4,5 mm borrhjup

