



Suosittelava poraus järjestysopas

Interna BTI-implanttien osalta



HUOMAUTUS: kysy jälleenmyyjältäsi tuotteen saatavuudesta eri markkinoilla

Poraussyvyyden merkit

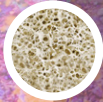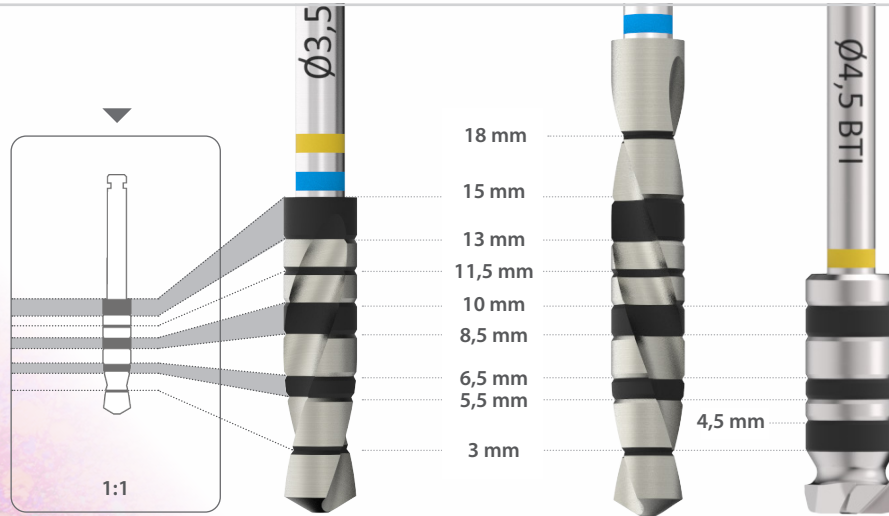

LUOKKA / HOUNSFIELD

0	1.400 - 1.200	III	800 - 500
I	1.200 - 1.000	IV	500 - 400
II	1.000 - 850	V	350 - 100

PORA

Aloituspora
Pora
Upotusporat
Edestä leikkaavat porat

KIERROSNOPEUDET

800 - 1.000 rpm
50 - 75 rpm
150 - 200 rpm
50 - 75 rpm


KASTELU

kyllä
ei
ei
ei

Implantin pituudet (6,5 - 13 mm)




Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 6,5 mm
Poraussyvyys 2-3 mm

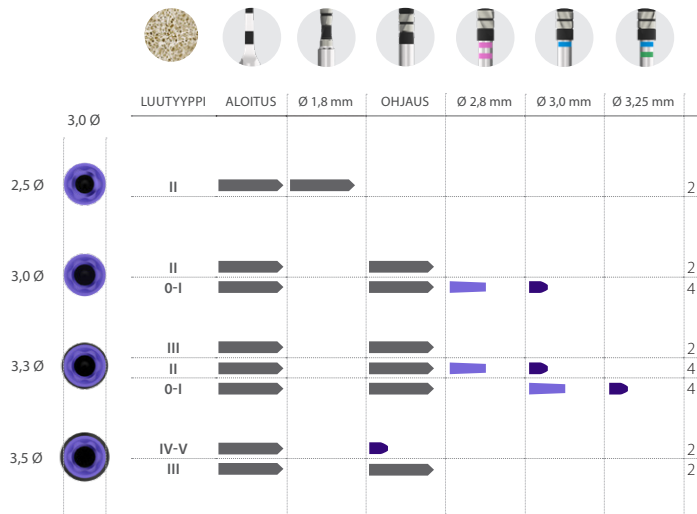

Implantin pituudet (4,5 - 5,5 mm)




Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 2-3 mm

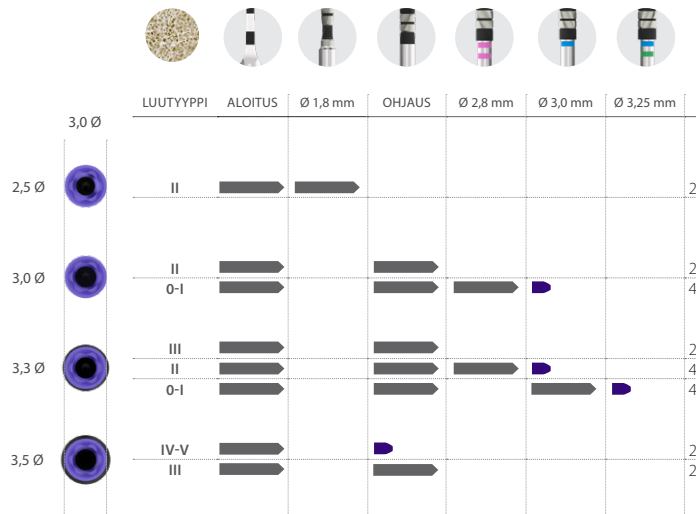



Implantin pituudet (7,5 - 15 mm)

Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 6,5 mm
Poraussyvyys 2-3 mm

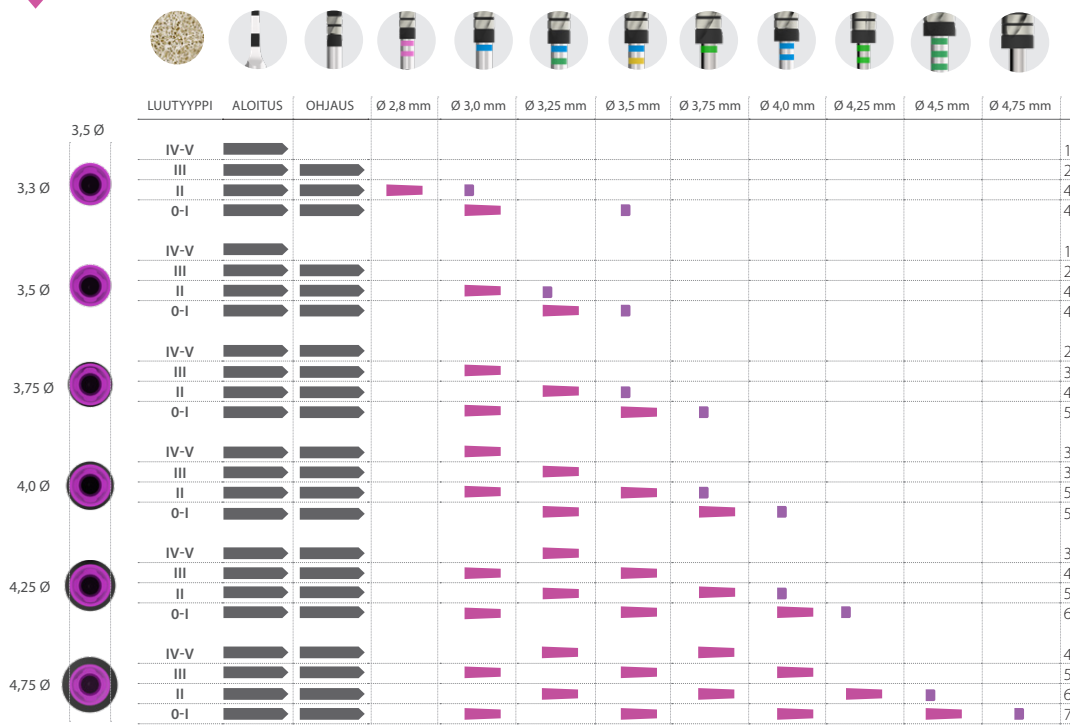




Implantin pituudet (4,5 - 6,5 mm)




- Implantin kokonaispituus
- X.X Ø Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 2-3 mm

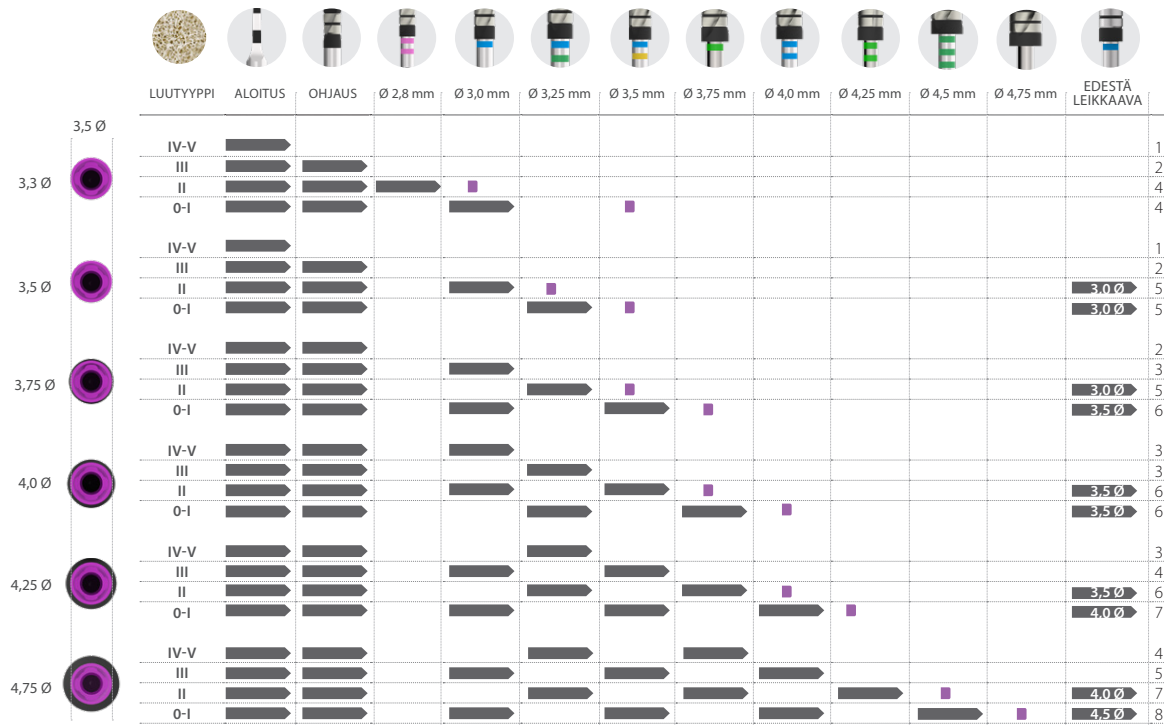



Implantin pituudet (6,5 - 13 mm)

Implantin kokonaispituus
Porausvyvyys 5,5 mm
Porausvyvyys 2-3 mm

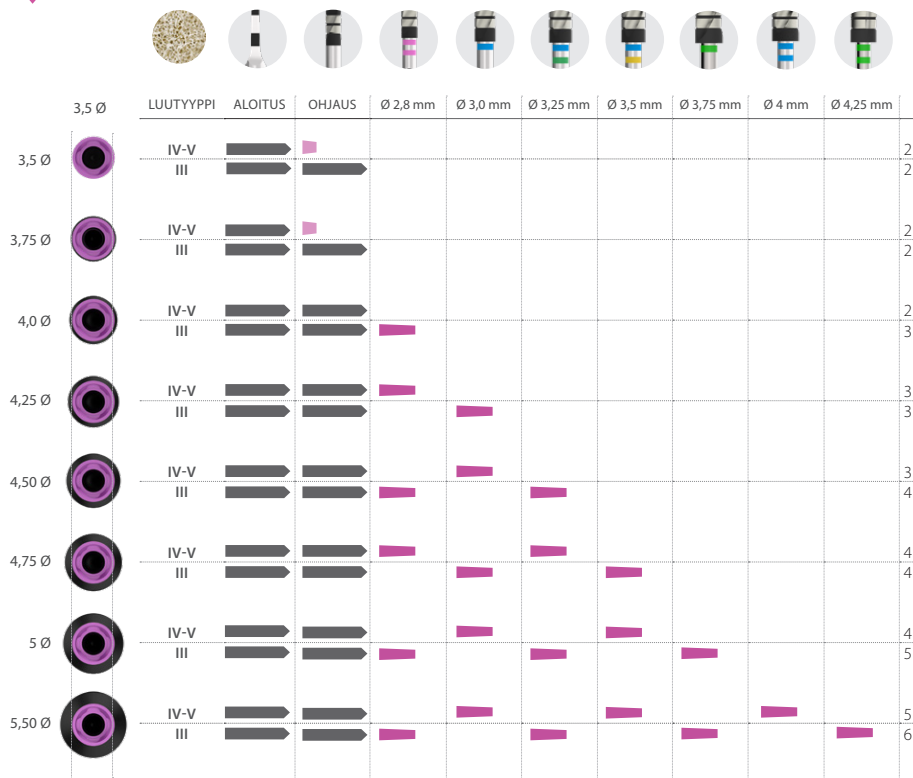

TÄRKEÄÄ:

Jyrsintäjärjestys
koskee vain CORE-X
-implantteja


Porausjärjestyksen
opas





Implantin pituudet (4,5 - 5,5 mm)

Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 2-3 mm

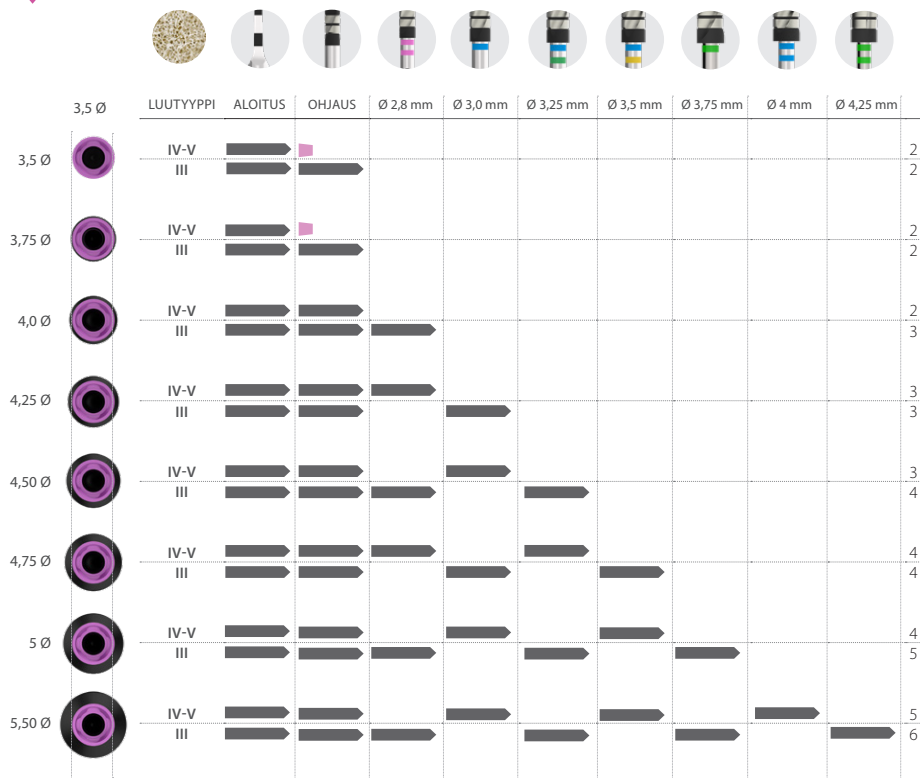

TÄRKEÄÄ:

Jyrsintäjärjesty
koskee vain CORE-X
-implantteja


Porausjärjestyksen
opas



Implantin pituudet (10 - 15 mm)



- Implantin kokonaispituus
- 75 % implantin kokonaispituudesta
- 25 % implantin kokonaispituudesta
- Poraussyvyys 5,0 mm

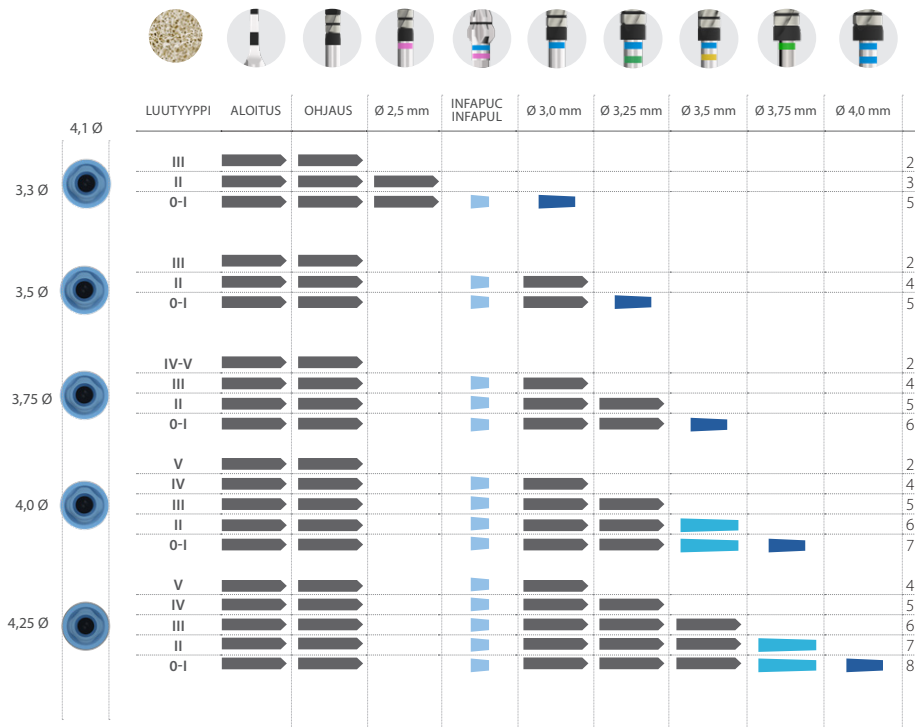


opas Porausjärjestyksen



Implantin pituudet (5,5 - 8,5 mm)

- Implantin kokonaispituus
- Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla
- Poraussyvyys 5,0 mm
- Poraussyvyys 2-3 mm

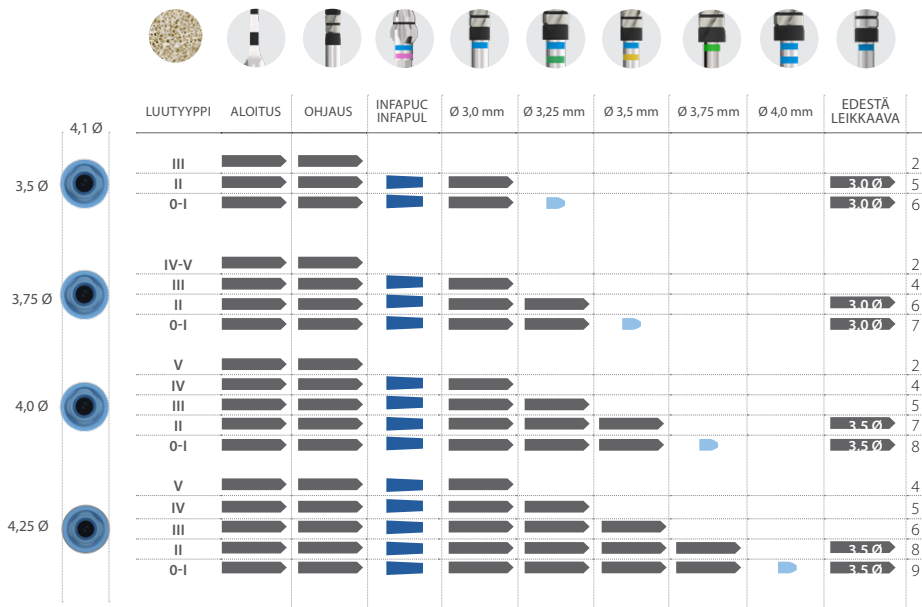




Implantin pituudet (8,5 - 15 mm)



Implantin kokonaispituus
Poraussyvyys 6,5 mm
Poraussyvyys 3 mm

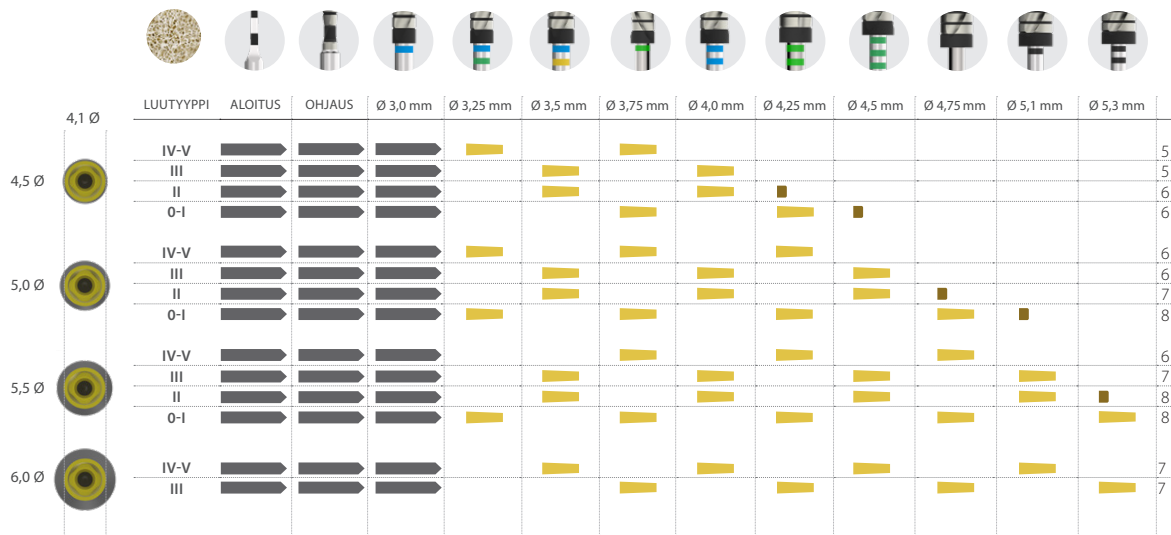



Implantin pituudet (4,5 - 7,5 mm)



Implantin kokonaispituus



Implantin kokonaispituus määritetyllä halkaisijalla



Porausvyövyys 3 mm

		LUUTYYPPI	ALOITUS	OHJAUS	Ø 3,0 mm	Ø 3,25 mm	Ø 3,5 mm	Ø 3,75 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,25 mm	Ø 4,5 mm	Ø 4,75 mm	Ø 5,1 mm	Ø 5,3 mm	EDESTÄ LEIKKAAVA	
4,1 Ø																
4,5 Ø		IV-V														5
		III														5
		II													4.0 Ø	7
		0-I													4.0 Ø	7
5,0 Ø		IV-V														6
		III														6
		II													4.5 Ø	8
		0-I													4.5 Ø	9
5,5 Ø		IV-V														6
		III														7
		II													5.1 Ø	9
		0-I													5.1 Ø	9
6,0 Ø		IV-V														7
		III														7

